

Futura Plus

Taloudellinen ja monipuolinen



Käyttövarma klassikko uusin värein ja varustein

Futura Plus -potilassängyssä on useita hoitotoimenpiteitä helpottavia ja hyvät työasennot mahdollistavia ominaisuuksia.



Futura Plus on Merivaaran klassikkosänkymallisto, joka on vastannut laadukkaasti hoitotyön kehitystarpeisiin jo pitkään. Se on kestävä, muunneltava, taloudellinen käytössä ja soveltuu sekä sairaala- että hoitokotikäyttöön.

Futura Plus -potilassängyn laatu täyttää vaativatkin standardit. Mallisto myös elää ajassa. Uusia ominaisuuksia, värejä ja varusteita on kehitetty käyttäjien toiveiden mukaisesti hoitokäytäntöjen ja -ympäristön kehittymisen myötä.



Selkäosan säädön käyttökahva on hyvin hoitajan ulottuvilla. Kuvassa myös potilaan oma käyttökahva selkäosan säätöön.



Mini-ACP-rajoitinlaite
Akkusarja

10000 1099
10000 1091



Käyttöpoljin makuutason hydrauliselle korkeuden säädölle.

Lisävarusteet ja vaihtoehdot

Päädyt



Siirrettävät päädyt


Päädyt on helppo irrottaa pikalukkojen ansiosta. Voidaan käyttää jalkalautana joko sängyn lyhentämiseksi tai pidentämiseksi. Kehysputki kromattu. Laminaattilevy, eri värejä, 80 ja 90 cm leveinä.

Teräspääty

Muotoiltua teräsputkea vetojen kiinnitykseen.

10000 0707.....80 cm

10000 0726.....90 cm

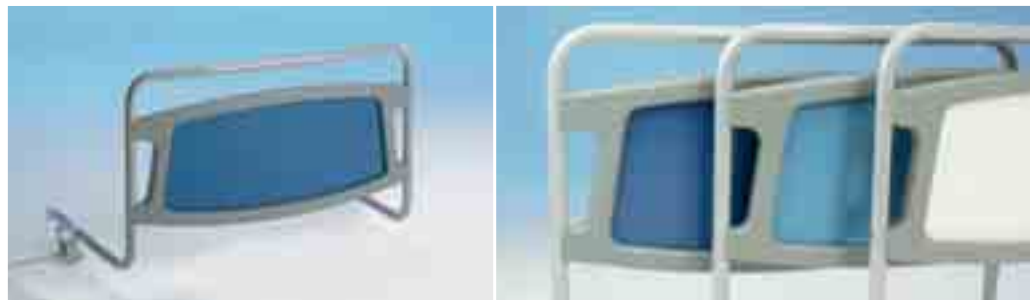

Siirrettävä design-pääty

Kiinnitys makuutason kehysputken päälle.

Pituus säädettävissä + 200 mm.

10000 9880.....80 cm

valkoinen

10000 9882

vaaleansininen

10000 9888

sininen

10000 9980.....90 cm

valkoinen

10000 9982

vaaleansininen

10000 9988

sininen

Design-päätyjen väri vaihtoehdot

Nousun apuvälineet, nesteantotelineet



Kohottautumistelineet

Tarttumiskahva pysyy potilaan ulottuvilla selkäosan asennosta riippumatta. Kiinnitys ja irrotus helppoa, putki irrotettavissa erikseen. Kaksi tarttumiskahvamahdollisuutta.

10000 0770 (vasen), 10000 0772 (oikea)

Nousutuki

Kätevä apuväline helpottamaan sängystä nousemista. Kiinnitys sängyn molemmille puolille. Irrotettava tukikahva, kolme eri asentoa.

10000 7755

Nesteenantoteline

Suora malli. Pikakiinnitys sängyn jokaiseen kulmaan, säädettävä korkeus.

10000 0499

Nesteenantoteline

Taittuva malli. Pikakiinnitys sängyn jokaiseen kulmaan, säädettävä korkeus.

10000 0708

Muut lisävarusteet



Aputaso
Käytetään linna-vaatteiden ja hoitotarvikkeiden laskutasona. Ulosvedettävä, irrotettavissa puhdistusta varten.
10000 0762



Kirjoitus-/monitoritaso
Helppo kiinnitys siirrettävään päättyyn ulko- tai sisäpuolelle.
12800 9768



Jatkolevy
Sängyn pituuden jatkamiseen n. 200 mm. Kiinnitys siirrettävän päädyn kehysputken päälle.
10000 0718 80 cm
10000 0728 90 cm



Virtsapulloteline
12800 9790



Tarvikekori
Kiinnitys siirrettävään päättyyn. Valmistettu kromatusta teräs-lan-gasta.
10000 0784



Käsi-kahva selkösosan säätöön, potilaan käyttöön
Irrotettava, voidaan käyttää sängyn molemmilla puolilla.
10000 0782



Nimilappupidike
Helppo kiinnittää makuutason kehysputkeen.
10000 0798



Virtsapussiteline
10000 0799

Pyörät ja lukitus



oteline
lli. Pikakiin-
n jokaiseen
äädettävä



Keskuslukitusjärjestelmä
Varmatoimisen keskuslukitus-järjestelmän ansiosta sängkyjen liikuttelu käy kevyesti.



Lisäjarrupoljin pääpuolen pyöriin
Saatavana kaikkiin keskuslukituspyörästöihin.



Design-pyörät, Ø 125 tai 150 mm.
Erikoismuotoillut, keskuslukitusjärjestelmä

PJP-pyörät, Ø 125 mm. Varustettu korkeatasoisella laakeroinnilla, keskuslukitus-järjestelmä.

Erillislukittavat pyörät, Ø 125 mm.

Helppokäyttöiset toiminnot ja raikkaat värit ilahduttavat hoitotyön arkea

Futura Plus –potilassängyn esteetön muotoilu lisää hoitoergonomiaa ja sängyn puhtaanapitoa. Selkeä tuoterakenne ja raikas väryitys useine väri vaihtoehtoineen tuovat rauhallisuutta ja tyylikkyyttä potilashuoneen sisustukseen.

Futura Plus –potilassängyissä makuutason säädöt (korkeus, selkäosa ja jalkaosa) saa tarvittaessa sähkökäyttöisinä. Sähkösäädöt keventävät hoitotoimenpiteitä ja varmistavat potilaan turvallisen käsittelyn. Käsi ohjaimesta potilas voi myös itse säätää sänkyä mieleiseensä asentoon. Futura Plus -potilassängyn saa myös mekaanisesti toimivana hydraulisella korkeudensäädöllä ja kaasujousiavusteisilla makuutason säädöillä.



Futura Plus varustettuna hydraulisella korkeussäädöllä ja kaasujousiavusteisella selkäosan säädöllä. Helppokäyttöiset säätökahvat ja -polkimet ovat sängyn molemmilla puolilla.

Futura Plus –sängystä on saatavana myös kiinteäkorkuinen malli, jonka selkäosan säädöt sekä Trendelenburg-säädöt toimivat kaasujousen keventäminä.

Sähkökäyttöiset makuutason säädöt keventävät hoitotyötä ja lisäävät potilaan mukavuutta.



Futura Plus -malliston muunneltavuus ja potilasmukavuutta lisäävät toiminnot ovat etuja, jotka helpottavat päivittäistä hoitotyötä.



Monipuolisen lisävarustevalikoiman ansiosta Futura Plus -sänky on taloudellinen käytössä.



Trendelenburg- ja anti-Trendelenburg-asennot toimivat portaattomasti kaasujousen keventäminä. Laajat säätöalueet.

Futura Plus

Sairaalasänky

TEKNISET TIEDOT

- alarunko epoksijauhemaalattua tai kromattua terästä
- välirunko epoksijauhemaalattua terästä
- makuutaso 2- tai 3-osainen; kehysputki epoksijauhemaalattua tai kromattua terästä, pohjalevy epoksijauhemaalattua terästä
- pyörät Ø 125 tai 150 mm, erikoislaakeroidut, keskuslukitusjärjestelmä

MITAT

- kokonaispituus 2135 mm
- kokonaisleveys 845 tai 945 mm
- suositeltava patjakoko 750 × 2000 tai 850 × 2000 mm
- korkeus 600 mm (kiinteäkorkuisessa sängyssä)
- paino n. 90 kg ilman lisävarusteita
- maksimikuorma (sis. varusteet) 180 kg

SÄÄDÖT

- makuutason korkeus hydraulisesti (säätöalue 415–810 mm) käyttöpolkimella sängyn molemmilta puolilta tai sähköisesti (säätöalue 440–830 mm) säätimen avulla
- selkäosan säädöt portaattomasti kaasujousen keventämänä tai sähköisesti
- Trendelenburg- (–26°) ja anti-Trendelenburgsäädöt (+14°) portaattomasti kaasujousen keventämänä
- jalkaosan säätö (makuutaso 3-osainen) kaasujousen keventämänä tai sähköisesti

VÄRIVAIHTOEHDOT

- valkoinen RAL 9002
- hopea RAL 9006
- vaaleansininen RAL 5023
- sininen RAL 5024
- kromattu

Takuu 3 vuotta



Merivaara Oy

Puustellintie 2, 15150 LAHTI

Puh. (03) 3394 611 • faksi (03) 3394 6134

merivaara@merivaara.fi

www.merivaara.fi

