

# Матрацы

Для больничных функциональных кроватей  
и кроватей для ухода за больным дома




- Неаллергенные
- Долговечные безопасные материалы
- Легкость чистки, гигиеничность и антибактериальные свойства
- Мягкая на ощупь надежная опора
- Широкий ассортимент для любых нужд

Ассортимент специальных матрацев производства компании Merivaara создан на основе специфических требований различных условий ухода за пациентом. Матрацы дополняют и подчеркивают лучшие качества кроватей Merivaara, обеспечивая максимальный комфорт пациенту. В изделиях с различными качественными характеристиками учтены особенности применения в каждом конкретном случае. При производстве данных матрацев использованы только высококачественные материалы, что подтверждено тщательной проверкой в лабораторных и клинических условиях.

# Специальные матрасы


## Для больничных функциональных кроватей и кроватей для ухода за больным дома

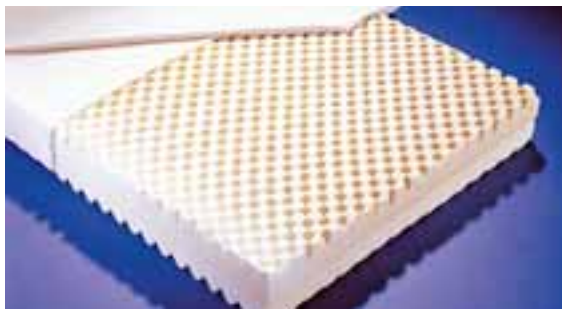

**Medi-Form** 10000 0948 200 X 75 X 13 см  
10000 0949 200 X 85 X 13 см



**Medi-Ultra** 10000 0931 200 X 75 X 12 см  
10000 0933 200 X 85 X 12 см  
12800 9933 205 X 80 X 12 см  
12300 9913 166 X 80 X 12 см

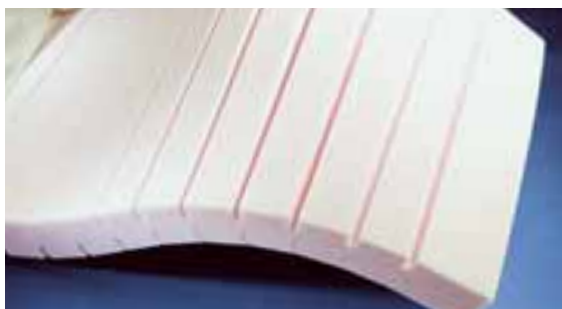

**Medi-Flex-Safe** 10000 0941 200 X 75 X 13 см  
10000 0943 200 X 85 X 13 см



**Medi-Flex-Tricot** 10000 0937 200 X 75 X 13 см  
10000 0938 200 X 85 X 13 см



**Medi-Tricot** 10000 0935 200 X 75 X 10 см  
10000 0936 200 X 85 X 10 см

### Medi-Form

Очень мягкий матрас с профильной поверхностью для использования в лечебных учреждениях. Матрас изменяет форму в зависимости от температуры и в соответствии с рельефом тела пациента.

- Предотвращает пролежни и онемение тела.
- Лучше всего подходит для длительного использования, даже при большой массе тела пациента.
- Гибкий, отлично подходит для использования на многосекционных кроватях.
- Верхний слой изготовлен из вязкоупругого поролона Formax, нижний слой – из поролона Relax-55.
- Чехол – легкоочищаемая биэластичная гигиеничная ткань с бактерицидными свойствами. Ткань водонепроницаема, но пропускают влагу, что уменьшает потовыделение.
- Пожаростойкость: IMO FTPC, часть 9.

### Medi-Ultra

Универсальный матрас из высококачественного поролона.

- Двусторонний гигиеничный жесткий матрас с мягким покрытием.
- Мягкое покрытие снижает давление и предотвращает онемение тела.
- Долговечный матрас, подходящий для пациентов с любой массой тела.
- Гибкий, хорошо подходит для использования на многосекционных кроватях.
- Изготовлен из высокоэластичного поролона Relax-55.
- Чехол – легкоочищаемая биэластичная гигиеничная ткань с бактерицидными свойствами. Ткань водонепроницаема, но пропускают влагу, что уменьшает потовыделение.
- Пожаростойкость: IMO FTPC, часть 9.

### Medi-Flex-Safe

Очень гибкий гигиеничный матрас с поперечными надрезами.

- Рекомендуется для краткосрочного использования для пациентов со средней массой тела.
- Поперечные надрезы позволяют матрасу изгибаться в обоих направлениях.
- Изготовлен из упругого технического поролона E-33 PS.
- Чехол – легкоочищаемая биэластичная гигиеничная ткань с бактерицидными свойствами. Ткань водонепроницаема, но пропускают влагу, что уменьшает потовыделение.
- Пожаростойкость: IMO FTPC, часть 9.

### Medi-Flex-Tricot

Стандартный матрас с поперечными надрезами для использования в лечебных учреждениях; рекомендуется к использованию на 3-х или 4-х секционных кроватях при частом изменении положения секций.

- Рекомендуется для краткосрочного использования для пациентов со средней массой тела.
- Поперечные надрезы позволяют матрасу изгибаться в обоих направлениях.
- Изготовлен из упругого поролона E-35.
- Чехол изготовлен из трикотажа.
- Пожаростойкость: SFS-EN 597-1.

### Medi-Tricot

Прочный матрас для использования в лечебных учреждениях.

- Рекомендуется для краткосрочного использования для пациентов со средней массой тела.
- Изготовлен из упругого поролона E-35.
- Чехол изготовлен из трикотажа.
- Пожаростойкость: SFS-EN 597-1.



**Merivaara Corp.**

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND  
Tel, +358 3 3394 611 • Fax +358 3 3394 6144  
merivaara@merivaara.fi

[www.merivaara.com](http://www.merivaara.com)

Инструкция по чистке маркирована на чехле матраса.