


Vanto II leikkauspöytäjärjestelmä

Leikkauspöytäjärjestelmä Vanto II vaihdettavilla leikkaustasoilla koostuu kolmesta peruselementistä: pilarista, leikkaustasosta ja siirtovaunusta järjestelmän siirtämistä varten. Se on suunniteltu nykyaikaisten leikkaussalien tarpeisiin. Vanto II luo optimaalisen käyttökokemuksen niin potilaalle kuin käyttäjällekin. Se täyttää nykyaikaisten kirurgisten toimenpiteiden vaatimukset. Täydellisen leikkaustason modulaarisuuden ja ainutlaatuisen tason osien lukitusmekanismin ansiosta potilaan asettelu leikkausasentoihin on helppoa ja turvallista. Vanto II -järjestelmän käyttö mahdollistaa paremman potilaslogistiikan.

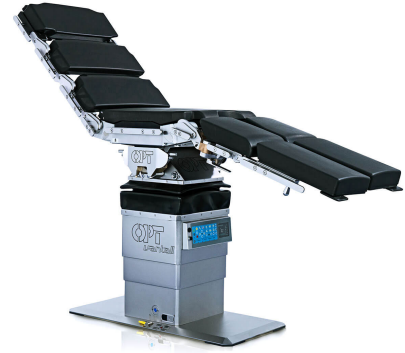

Kolme pilaria erilaisiin tarpeisiin

- Siirrettävässä Mobiili-pilarissa on erittäin litteä alusta, mikä tarjoaa käyttäjille esteettömän pääsyn leikkaustasolle ja edesauttaa yhteensopivuutta mm. C-kaaren kanssa.
- Vanto II Mobiili Plus -mallin kaksi jalustaan integroitua pyörää mahdollistavat pöydän siirtämisen ilman vakiovaunua.
- Kiinteä pilari kiinnitetään lattiaan pysyvästi. Tason 340° liike mahdollistaa monipuoliset potilaan asentomahdollisuudet erityyppisissä leikkauksissa.



Kolme siirtovaunuvaihtoehtoa

Minisiirtovaunua voidaan käyttää leikkaustason siirtoihin tai pieniin säätöihin ennen leikkausta, sen

aikana tai sen jälkeen.

Sivuttaissiirtovaunu mahdollistaa leikkaustason tai koko järjestelmän siirtämisen joko potilaan vasemmalta tai oikealta puolelta. Vaunu sopii erityisesti pieniin leikkaussaleihin. Lisäksi sivuttaissiirtovaunu mahdollistaa leikkausasennon toteuttamisen ennen pilariin kiinnittämistä jo salin ulkopuolella.

Pitkittäissiirtovaunu mahdollistaa leikkaustason tai koko järjestelmän siirtämisen joko pään tai jalkojen puolelta. Sitä on helppo liikuttaa valinnaisen 5. pyörän ansiosta, joka voidaan aktivoida helposti ja nopeasti jalkapainikkeella.



Tekniset tiedot

Leveys (makuutaso)	590 mm
Korkeussäätö	600 - 1150 mm
Trendelenburg	-56 °
AntiTrendelenburg	+56 °
Pääntuen säätö	+53 - -53 °
Selkäosan säätö	-50 - +90 °
Jalkaosan säätö	-90 - +90 °
Patja-alusta (leveys)	530 mm
Pöydän pituussuuntaissiirto	475 mm
Lateraalikallistus	35 - 35 °
Enimmäisnostokapasiteetti	453 kg
Tuotekoodi	8803000, 8811000, 8812000, 8821000, 8822000
Valmistaja	OPT SurgiSystems S.r.l.

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com