




Mesas de operaciones

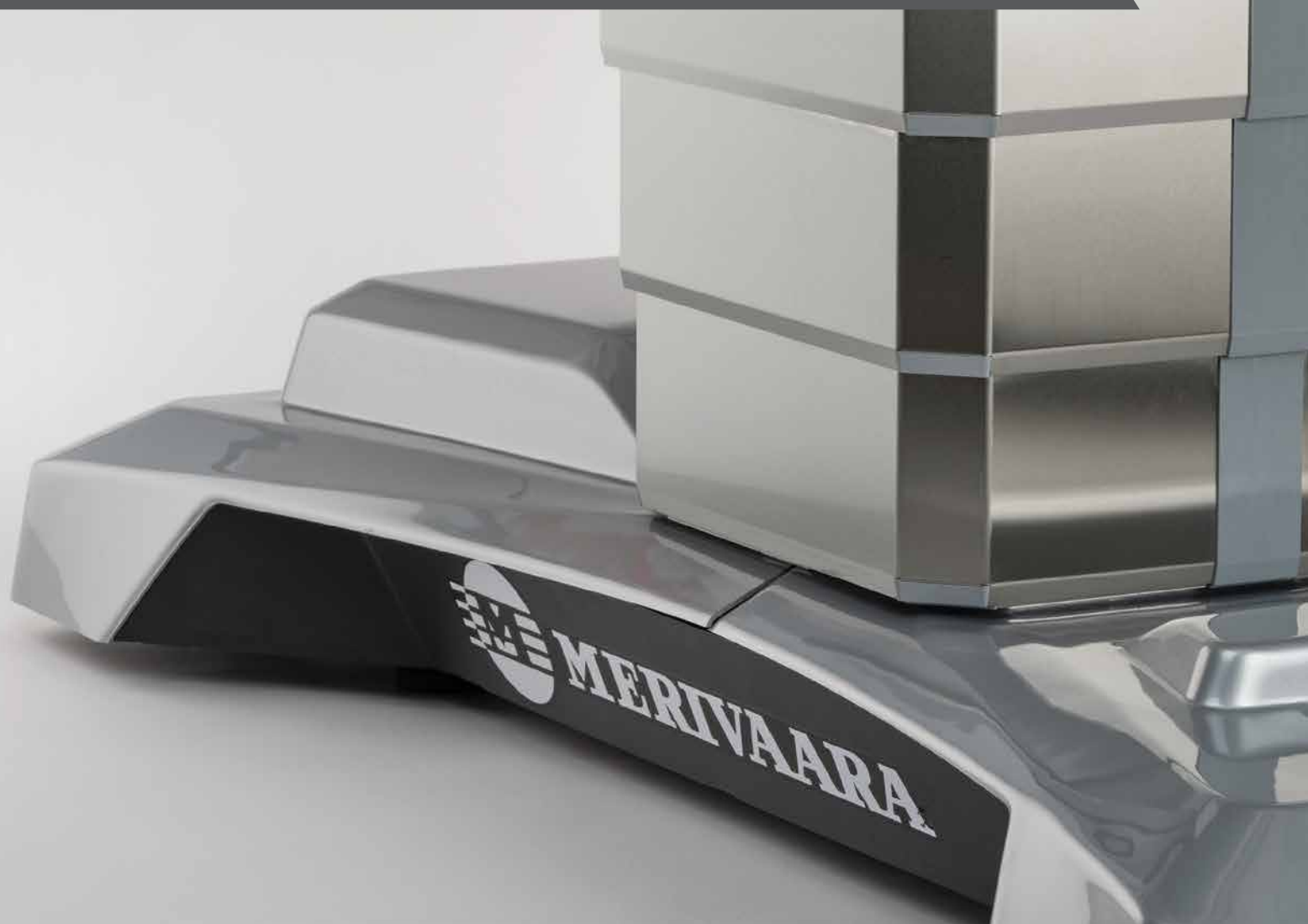


Usabilidad fluida

Desde 1901

“Además de la exquisita calidad del trabajo, hemos tomado el mayor interés en la funcionalidad del equipo. A este respecto, varios médicos comprometidos con la causa han contribuido con sus consejos, basados en sus apreciables experiencias.”

Juho Merivaara en 1926, fundador de Merivaara

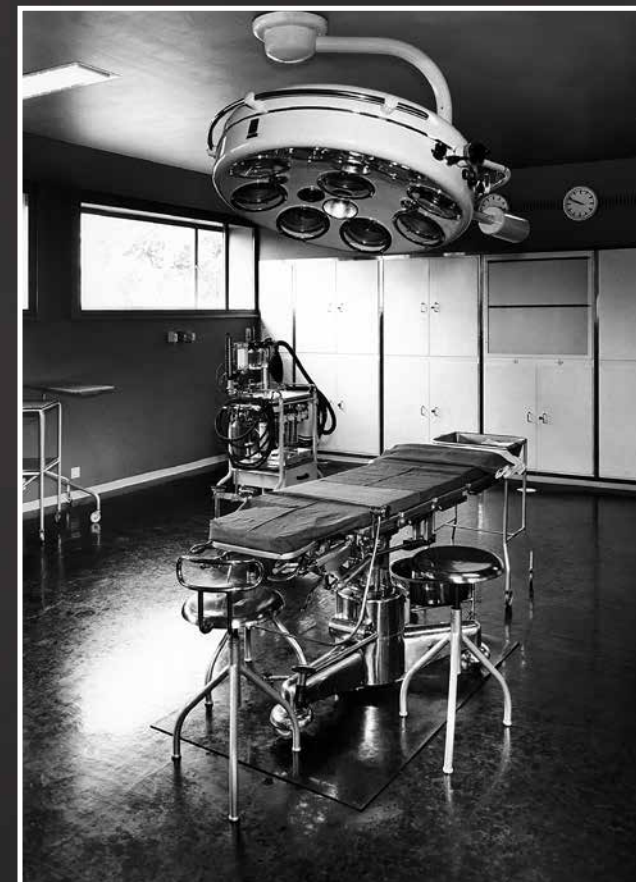


En una moderna sala de operaciones de la década de 1950, mesas y las luces se ajustaron manualmente.



Estamos orgullosos de que los valores de la empresa hace 120 años estaban tan adelantados a su tiempo que todavía hoy pueden ser. Se aplica plenamente al diseñar nuevas soluciones innovadoras, para profesionales sanitarios. Esto se demuestra por nuestros últimos productos galardonados, el Q-Flow quirúrgico Light y la mesa de operaciones Smarter Practico con funcionalidad y facilidad de uso en el corazón del diseño. Nuestras interfaces de usuario se desarrollan junto con personal del hospital para que todos nuestros productos y sistemas ser utilizado intuitivamente.

A esto lo llamamos usabilidad fluida; el personal de la sala de operaciones puede centrarse en la atención al paciente, no en la gestión de tecnologías complejas. Los mejores cirujanos del mundo aprecian esto sobre todo.



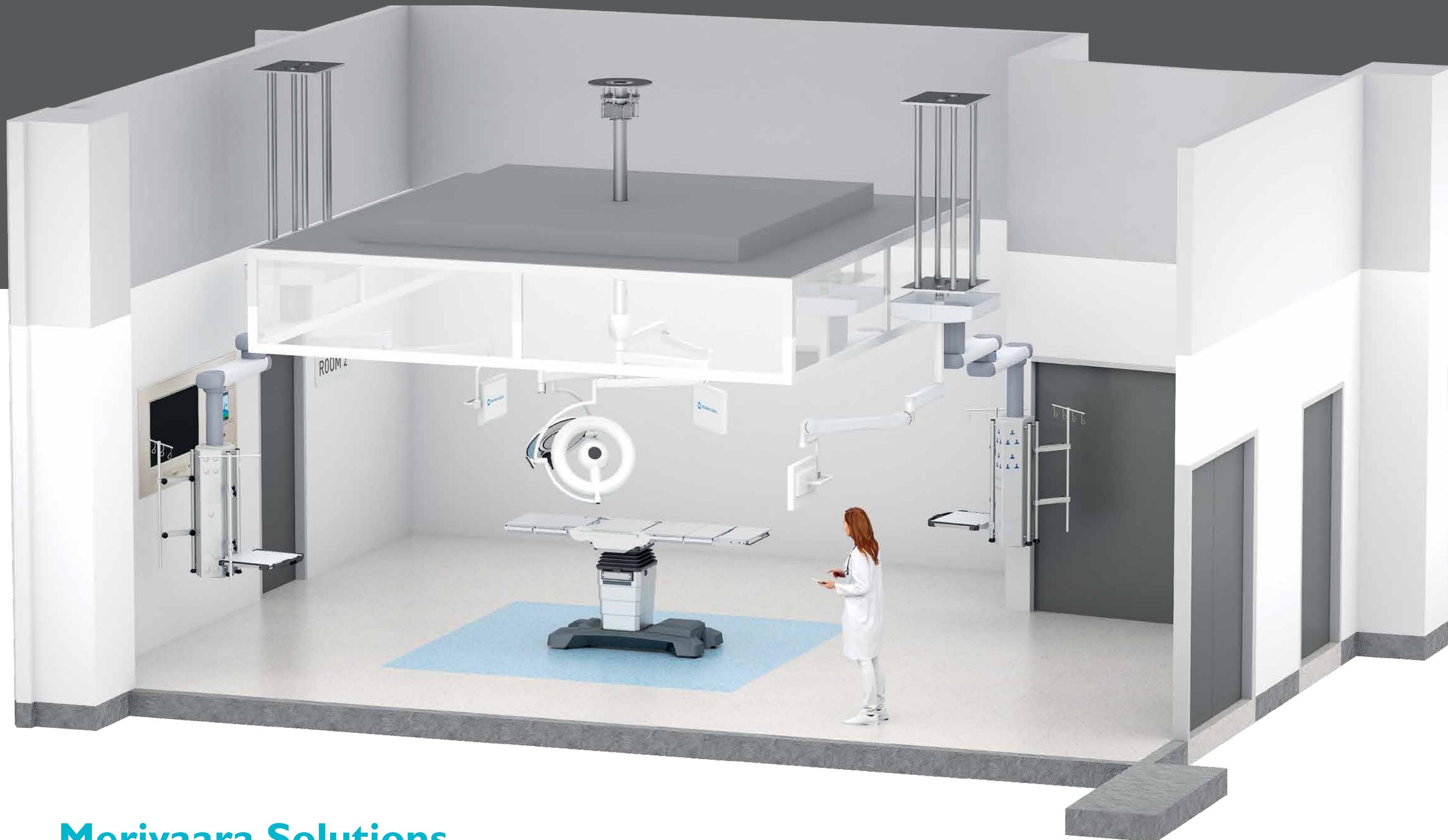

Merivaara Solutions


Merivaara Solutions ofrece a los quirófanos una amplia gama de productos, sistemas y servicios de alta calidad. Nuestras soluciones no solo garantizan la seguridad del paciente, sino que también brindan a los operadores de atención médica la mejor relación calidad-precio.

Al diseñar nuestras soluciones en torno a todo el equipo quirúrgico, es importante que escuchemos las necesidades del cliente. Esto nos permite asegurarnos de que el equipo pueda implementar los procedimientos de manera segura, rápida y confiable. Al mismo tiempo, se optimiza el flujo de trabajo y aumentará la productividad de todo el equipo.

Merivaara tiene una larga experiencia liderando e implementando proyectos en quirófanos. Para nosotros, mantener los proyectos programados y reducir los costos es extremadamente importante.

- LUCES QUIRURGICAS • LUCES DE EXAMEN
- MESAS DE OPERACIÓN • ACCESORIOS DE MESA
- SISTEMAS DE INTERGRACIÓN • MONITORES Y BRAZOS DE MONITOR
- COLGANTES • PROYECTOS • SERVICIOS MERIVAARA

Grand Promerix para un flujo de trabajo exigente

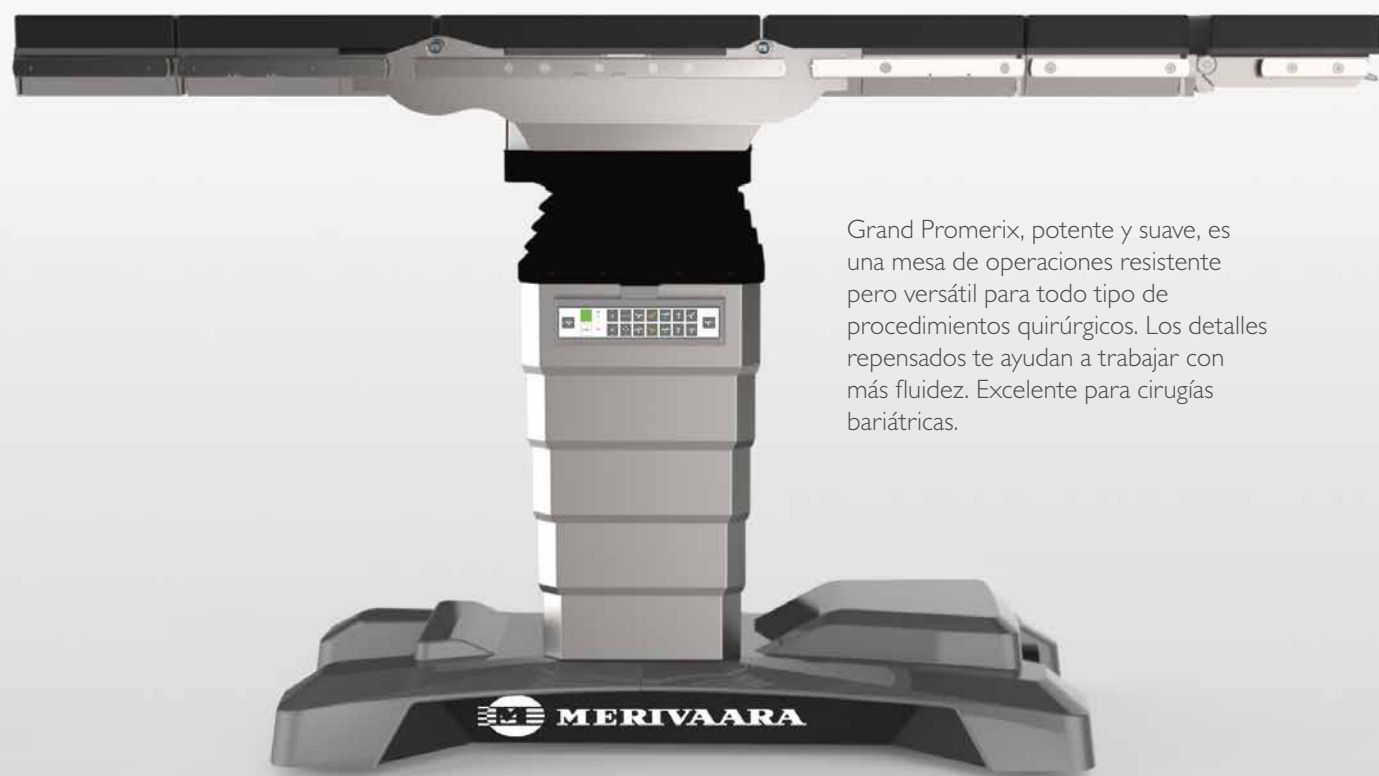

Grand Promerix, potente y suave, es una mesa de operaciones resistente pero versátil para todo tipo de procedimientos quirúrgicos. Los detalles repensados te ayudan a trabajar con más fluidez. Excelente para cirugías bariátricas.

Reflejos

El diseño ergonómico mejorado mejora la comodidad de todo el equipo quirúrgico. La comodidad conduce a la concentración, la confianza y una mejor cooperación. Eso es eficiencia.



Beneficios del Gran Promerix

1. ERGONOMÍA MEJORADA

Grand Promerix tiene muchos detalles mejorados para una mejor ergonomía, por ejemplo, ruedas más pequeñas y ocultas y un corte curvo para aumentar el espacio para los pies. Diseño centrado en el ser humano en su máxima expresión.



2. ACCESO AL BRAZO EN C

La base delgada renovada le brinda un acceso perfecto al brazo en C. Grand Promerix está diseñado para cumplir con los más altos estándares de la sala de operaciones.



3. MAYOR HIGIENE

Detalles rediseñados pensando en la seguridad del paciente. La nueva sección de fuelles y asientos, entre otras mejoras, hace que Grand Promerix sea higiénico y fácil de limpiar.



4. FLUENT LOCK™

Nuestro sistema de bloqueo Fluent es fácil de usar y confiable. Conéctese con un clic.



ORTOPEDIA TRAUMATICA

Grand Promerix para traumatología ortopédica es la solución flexible para cualquier quirófano que realice procedimientos ortopédicos. Con el dispositivo de extensión ortopédica FLEXION paciente El posicionamiento nunca ha sido tan fácil. Acceso completo al brazo en C.



“ Configurando
La flexión es tan
fácil como
uno, dos, tres...”



EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

- Artroscopia de cadera
- Reemplazo total de cadera
- Procedimientos de extremidades inferiores: enclavado de tibia, enclavado de fémur
- Cirugía de la mano

ORTOPEDIA TRAUMATICA CIRUGÍA ORTOPÉDICA DEL HOMBRO

La solución flexible para cualquier quirófano que realice procedimientos artroscópicos. Gracias al gran recorte de la parte posterior, las operaciones de hombro son siempre ergonómicas para el cirujano y el paciente. El recorte de la sección trasera es lo suficientemente grande para una vista completa en la parte superior de la espalda y para mover el brazo del paciente. Por otro lado, proporciona un soporte adecuado para el paciente.



RECORTE GRANDE DE LA SECCIÓN TRASERA

permite movimientos de hombros y brazos durante la operación.



RECORTE DE LA SECCIÓN TRASERA

se puede liberar fácil y rápidamente.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

- Reparación del manguito rotador
- Reparación de Bankart
- Reparación de lesiones por bofetada
- Reemplazo total de hombro
- Reparación de clavícula
- Reemplazo total de hombro inverso



POSICIONES DE MEMORIA PROGRAMABLES

le permite volver a la posición de cirugía original después de que la mesa se haya puesto a cero para obtener imágenes.

ACCESORIOS ESPECIALES

FEMORAL ENCIMERA TRACCIÓN CORREO 519512

Contador femoral poste de tracción para posición lateral con ajuste de altura con Flexión.



ZAPATO ROTEXSHOE® BOTAS DE TRACCIÓN

La estabilidad y la flexibilidad no siempre son mutuamente excluyentes, sino propiedades que son de gran importancia, particularmente en el campo médico. Garantizan un tratamiento seguro e individual del paciente, y ampliar las posibilidades quirúrgicas. Las botas Special RotexShoe Traction ofrecen todo eso, y su fácil manejo facilita su trabajo.



ACCESORIOS ESPECIALES

PLAYA SILLA APOYO CINTURON 20127

Para apoyar al paciente en silla de playa durante la operación.



SILLA DE PLAYA REPOSACABEZAS PARA CASCO 30128

Casco multidireccional con correa para la frente, para ser utilizado para operaciones de hombro con respaldo de silla de playa.



GINECOLOGIA Y UROLOGIA


Grand Promerix para ginecología y urología es la solución flexible para cualquier quirófano que realice procedimientos ginecológicos y urológicos. El alto SWL, la función deslizante y la excelente El acceso con arco en C hace posible la fluoroscopia del área pélvica.



GRAN ACCESO PARA EL CIRUJANO Y EL ANESTESISTA

Debido a la nueva estructura de marco rediseñada y los ajustes de la mesa bien diseñados, el cirujano y el anestesista tienen acceso cercano al paciente.

DOS LIGERO SECCIONES DISPONIBLES

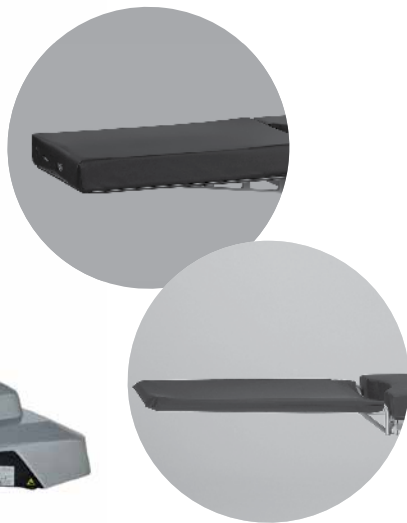

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

- Cirugía de endometriosis
- Cirugía para la depresión del útero y las paredes vaginales
- Raspado uterino
- Tratamiento de tumores del músculo uterino (tratamiento de miomas)
- Histerectomía
- Hidronefrosis
- Cirugía láser de próstata
- Cirugía de escroto
- Eliminación de semillas (esperma)
- Visión de la vejiga (cistoscopia)

ACCESORIOS ESPECIALES



ESTRIBOS K-TEK

Proporciona unpa acceso, mayor continuación de la infección rico, adulto y bariátrico



MOTORIZADO CCIÓN 60204

La acción mejora el trabajo s del personal de OR. es muy ligero resolver. La sección de piernas liviana de la mesa de operaciones con mecanismo Fluent elimina la necesidad de apoyarse en la sección liviana al colocarla.

NEUROCIRUGÍA

Grand Promerix es una solución flexible para todos los quirófanos neurológicos que realizan procedimientos delicados. Gracias al diseño seguro y fluido, está diseñado ergonómicamente para el paciente y el equipo quirúrgico. El diseño fluido crea un entorno para una óptima formación de imágenes La conexión de múltiples accesorios neurológicos es fácil gracias al bloqueo Merivaara Fluent™ sistema.



POSICIONAMIENTO SEGURO Y FÁCIL

Se pueden utilizar diferentes accesorios quirúrgicos para cirugía neurológica y de columna con Grand Promerix. El posicionamiento inverso es posible para diferentes necesidades.

ADAPTADOR DE REPOSACABEZAS 60146

Compatible con todos los productos neurológicos de Doro. Se puede montar fácilmente tanto en Grand Promerix como en Smarter Practico.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:


- Laminectomía
- Discectomía
- Fusión espinal
- Vertebroplastia / Cifoplastia




ACCESORIOS ESPECIALES



DORO ALUMINIO SISTEMA DE REPOSACABEZAS

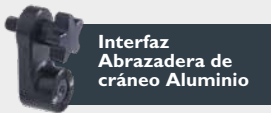

CERVICAL DORO REPOSACABEZAS COLUMNA SISTEMA

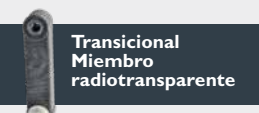

CERVICAL DORO REPOSACABEZAS COLUMNA SISTEMA



DORO CRANEAL REPOSACABEZAS COLUMNA SISTEMA

CIRUGÍA DE LA COLUMNA

Grand Promerix es una solución flexible para todos los quirófanos quirúrgicos al realizar procedimientos quirúrgicos de columna gracias a su diseño seguro y fluido. Está diseñado ergonómicamente para el paciente y el equipo quirúrgico. El diseño fluido crea un entorno para una imagen óptima. La fijación de secciones de fibra de carbono es fácil gracias a nuestro sistema de bloqueo fluido.

PLATAFORMAS ESTABLES PARA AMBOS NEUTRO Y POSICIONES FLEXIBLES

Soluciones perfectas, por ejemplo, para cervicales, lumbares, laminectomías, descompresiones, procedimientos quirúrgicos torácicos en pronación espinal.



Marco Wilson

Sistema flotante espinal

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

- Laminectomía
- Discectomía
- Fusión espinal
- Vertebroplastia / Cifoplastia


ACCESORIOS ESPECIALES



CABEZA PRONA CS
SISTEMA DE APOYO



CS CARA PRONA
AMORTIGUAR

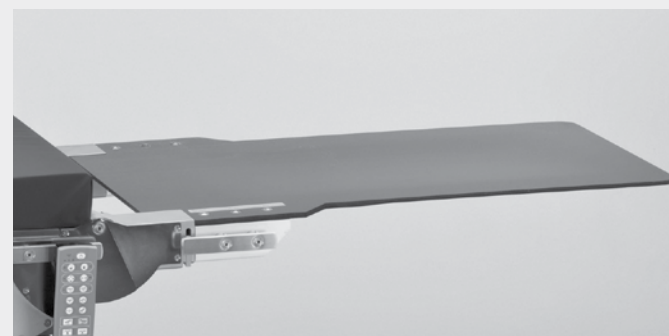

CF-RESPALDO 60502

TORÁCICA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Grand Promerix para cirugía torácica y cardiovascular es la solución flexible para cualquier quirófano que realice procedimientos cardiovasculares. La sección trasera larga de fibra de carbono. Garantiza imágenes de alta calidad.

ACCESO DEL ARCO EN C SIN OBSTRUCCIÓN


La sección larga posterior de fibra de carbono brinda capacidades de imagen sin obstrucciones. La sección trasera de fibra de carbono es liviana y fácil de usar gracias al sistema Merivaara Fluent lock™ system.




EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

- Angioplastia
- Cirugía de válvulas cardíacas
- Ablación con catéter
- Colocación de stent

ACCESORIOS ESPECIALES

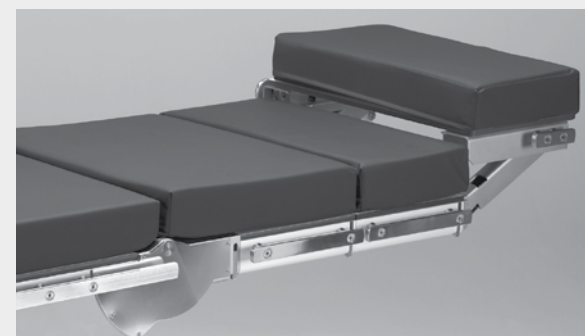

REPOSACABEZAS 60142

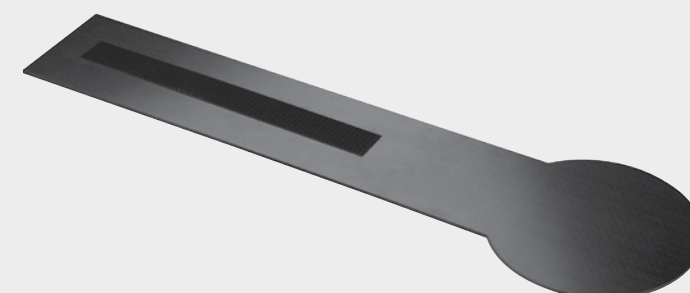

LAMINADO DE ALTA PRESIÓN
(HPL) REPOSA BRAZO 60510

PROCTOLOGIA

Los accesorios especializados permiten el posicionamiento seguro del paciente, al mismo tiempo que crean la acceso requerido tanto para el cirujano como para la instrumentista.



EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

- Colectomía
- Íleo/colostomía
- Plastia de estenosis
- Hemorroidectomía

“ Amplia gama de accesorios para diversas aplicaciones en nuestro Catálogo de Accesorios.

ACCESORIOS ESPECIALES



REPOSABRAZOS 19185

ESTRIBOS K-TEK

Proporciona unpa acceso, mayor continuación de la infección rico, adulto y bariátrico



CIRUGÍA PEDIÁTRICA

El tablero de la mesa está especialmente diseñado para uso pediátrico y brinda un acceso cercano para el cirujano cuando opera pacientes pequeños. Esto mejora la ergonomía del equipo de quirófano. También ofrece Excelente acceso al arco en C sin obstrucción de una pata de apoyo.



ACCESO CERRADO PARA OPERACIONES PEDIÁTRICAS

La sección pediátrica está diseñada para cirugía infantil. El tablero de la mesa es más angosto que otras secciones, lo que permite que los cirujanos y el equipo de atención médica se acerquen más al paciente. El peso máximo del paciente es de 40 kg. Incluye antiestático de 80 mm de espesor y colchón viscoelástico.



ACCESORIOS ESPECIALES

K-TEK 250 PAR DE ESTRIBO 12814



CIRUGÍA DE RIÑÓN

Grand Promerix para cirugía renal es la solución simple y flexible para quirófanos. El sistema elevador de puente renal integrado ayuda a ajustar al paciente a la posición deseada con facilidad.



PUENTE RIÑÓN ESPECIAL INTEGRADO A FIJO PARTE TRASERA

La sección trasera especial del puente de riñón es fácil de usar con una manivela.



MULTIFUNCIONAL MESA

El tablero de la mesa se puede configurar para adaptarse a todas las aplicaciones quirúrgicas.

POSICIONAMIENTO SEGURO Y FÁCIL

Flew, reverse flex y beach chair se pueden lograr fácilmente gracias a sus botones individuales dedicados en el control manual. buttons on the hand control.


EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

- Cirugía de cáncer de pulmón
- Cirugía de reducción de volumen pulmonar
- Cirugía esofágica
- Nefrectomía parcial o cirugía conservadora de nefronas
- Nefrolitotomía percutánea/ nefrolitotricia (cirugía de túnel)

ACCESORIOS ESPECIALES



RIÑÓN Y TORAX REPOSACABEZAS 60147

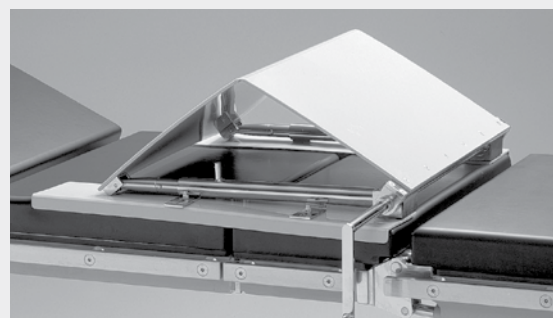

ELEVADOR DE ESPALDA Y RIÑONES 19280

CIRUGÍA BARIÁTRICA

La solución flexible para cualquier quirófano que realice procedimientos MIS. Con su alto SWL, función deslizante, oth el paciente y el quirúrgico



FÁCIL ACCESIBILIDAD

La articulación fluida de Grand Promerix garantiza soluciones ergonómicas óptimas.



POSICIONAMIENTO BAJO DEL PACIENTE

Es fundamental en el quirófano actual que el equipo pueda adaptarse a cualquier situación. Con la altura mínima de 30 cm, Promerix es la solución perfecta para la gastrocirugía bariátrica.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

- Cirugía bariátrica
- Laparoscopia
- Cirugía de hernia
- Cirugía de tumores
- Laparotomía

ACCESORIOS ESPECIALES



ESTRIBOS K-TEK

Proporciona unpa acceso, mayor continuación de la infección rico, adulto y bariátrico



PIERNA DIVIDIDA SECCIÓN 60484

Soluciones personalizadas para diferentes tipos de operaciones quirúrgicas

Parte inferior de la pierna secciones (exigir 60225 o 60425)

Fluido

Secciones de la parte superior de la pierna (adjuntar a la sección del asiento)

Fluido

Espalda baja secciones (adjuntar a la sección del asiento)

Fluido

Superior de la espalda secciones, adaptadores y bloqueo fluido reposacabezas

Fluido

Reposacabezas

2 varillas

Adaptador DORO (se conecta directamente a los rieles laterales)

23.


No.	N ° de pedido.	Nombre	Dimensiones	Peso
1.	I000 30248	Placas cortas para piernas divididas, asistidas por resorte de gas		
2.	I000 30147	Sección de pierna de una pieza, asistida por resorte de gas		
3.	I000 60475	Sección de pierna dividida larga, asistida por resorte de gas	594 x 880 x 260 mm	
4.	I000 60250	25 secciones	540 x 250 x 80 mm	7,6 kg
5.	I000 60240	40 secciones	540 x 400 x 80 mm	9,1 kg
6.	I000 60425	25 sección de ginecología	540 x 250 x 80 mm	5,3 kg
7.	I000 60440	40 sección de ginecología	540 x 400 x 80 mm	8,9 kg
8.	I000 145480	Sección de pierna dividida corta Junta doble		7,5 kg
9.	I000 60484	Placas para piernas divididas, 4 secciones	540 x 865 x 230 mm	25 kg
10.	I000 60201	Reposapiés ligero 60201	500 x 900 mm	5,2 kg
11.	I000 60225	25 sección corta	540 x 250 x 80 mm	5,4 kg
12.	I000 60502	CF-respaldo 60502	1200 x 540 mm	
13.	I000 60204	Sección de piernas ligera para piernas motorizadas 60204	540 x 630 x 80 mm	4,9 kg
14.	I00060525	Respaldo para silla de playa	540 x 650 x 80 mm	19,6 kg
12.	I00060325	Sección de espalda superior ENT 60325		
13.	I000 60140	Reposacabezas 60140	540 x 300 x 80 mm	6,3 kg
14.	I000 60142	Reposacabezas 60142	540 x 300 x 80 mm	6,4 kg
15.	I000 60146	Adaptador de reposacabezas 60146		2,5 kg
16.	I000 30128	Reposacabezas para silla de playa 30128		4,3 kg
17.	I000 30126	Reposacabezas para silla de playa 30126		4,6 kg
18.	I000 18101	Reposacabezas 18101	300 x 408 x 80 mm	4,1 kg
19.	I000 18150 I000 18151	Reposacabezas para otorrinolaringología/ofthalmología 18150 o 18151	225 x 290 x 60 mm	2,8-3,25 kg
20.	I000 18143	reposacabezas para cirugía ORL 18143	245 x 242 x 40 mm	3,4 kg
21.	I000 00142	Reposacabezas estrecho 142	275 x 206 x 50 mm	4,1 kg
22.	I000 00141	Reposacabezas ancho 141	275 x 406 x 50 mm	4,5 kg
23.	I003 00700	Adaptador DORO		
24.	I010 01100	Sistema de reposacabezas de aluminio DORO		
25.	I003 00900	Reposacabezas de herradura DORO		

Ofrecemos dos tipos de colchones:

Espuma viscoelástica (VEF) de máxima comodidad para el paciente contra las úlceras por decúbito. El material de la superficie está soldado ultrasónicamente para evitar la penetración de fluidos.



Los colchones de piel integral (IS) son soluciones Adaptador DORO despreocupadas para entornos exigentes.

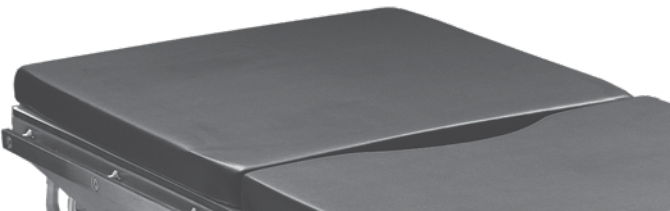

ALTURA MÁXIMA (*)



ALTURA MÍNIMA (**)



SECCIÓN ESPALDA Y PIERNAS MOTORIZADAS



ÁNGULO DE INCLINACIÓN



TRENDELENBURG ÁNGULO



PATA DESLIZANTE
210 MM



CABEZAL DESLIZANTE
200 MM



(*) MODELO DE DIAPOSITIVA (**) MODELO ANTIDESLIZANTE

Especificaciones técnicas

	Corredizo	Antideslizante
Longitud (tablero)	2100 mm	2100 mm
Ancho (tablero)	540 mm	540 mm
Ancho (base)	652 mm	652 mm
Ajuste de altura	650–1110 mm	610–1070 mm
Máx. peso del paciente	275 kg	325 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	275 kg	325 kg
Trendelenburg	-35°	-35°
Trendelenburg inverso	+35°	+35°
Ajuste del reposacabezas	-45 – +45°	-45 – +45°
Ajuste de la sección trasera	-45 – +80°	-45 – +80°
Ajuste de la sección de piernas	-105 – +70°	-95 – +70°
Tamaño de las ruedas	80 mm	80 mm
Frecuencia	47–63 Hz	47–63 Hz
Voltaje de entrada	100–240 VAC	100–240 VAC
Peso	325 kg	300 kg
Desplazamiento longitudinal del tablero de la mesa	410 mm	
Inclinación lateral	-25 – +25°	20 – 20°
Longitud del marco inferior	1317 mm	1317 mm
Distancia al suelo	25 mm	25 mm
Máx. Capacidad de levantamiento	490 kg	490 kg
Código de producto	100060000	100060000
Nombre oficial del producto: Promerix		

Fabricante: Merivaara Corp.





Health Technology with a Human Touch

Fabricado en Finlandia con respeto por
nuestra naturaleza única.



MERIVAARA CORP.

Lahti, Finland, Tel. +358 3 3394 611,
merivaara@merivaara.com www.merivaara.com

MERIVAARA EN TODO EL MUNDO

Sede de Merivaara, con I + D, producción, ventas, marketing y funciones de servicio posventa, se encuentran en Lahti, Finlandia. Merivaara tiene filiales en Suecia (Merivaara AB), Reino Unido (Merivaara Ltd) y una organización de ventas en Rusia. Además, los productos de Merivaara se venden en más de 120 países por una red de distribuidores.

El estado de la información, especificaciones e ilustraciones en esta publicación está indicada por la fecha de publicación. Mientras que se ha puesto el mayor cuidado en su compilación,

Merivaara Corp. no es responsable por errores u omisiones. Merivaara Corp. se reserva el derecho de realizar cambios en la tecnología, características, especificaciones y diseño de los equipos y modelos sin notificación. Consulte el sitio web de Merivaara para obtener las últimas especificaciones actualizadas y otra información.

Nota: Todas las posiciones ilustradas de los pacientes son solo ejemplos y se pueden realizar diferentes tipos de procedimientos en función de las necesidades personales o culturales. El posicionamiento adecuado del paciente debe ser realizado por un profesional capacitado.

Todas las marcas comerciales son propiedad de Merivaara a menos que se indique lo contrario. Patentes concedidas o pendientes.
©Merivaara Corp. DOC ID: 6172EN-2, Date: 11/2023