




Mesas de operaciones

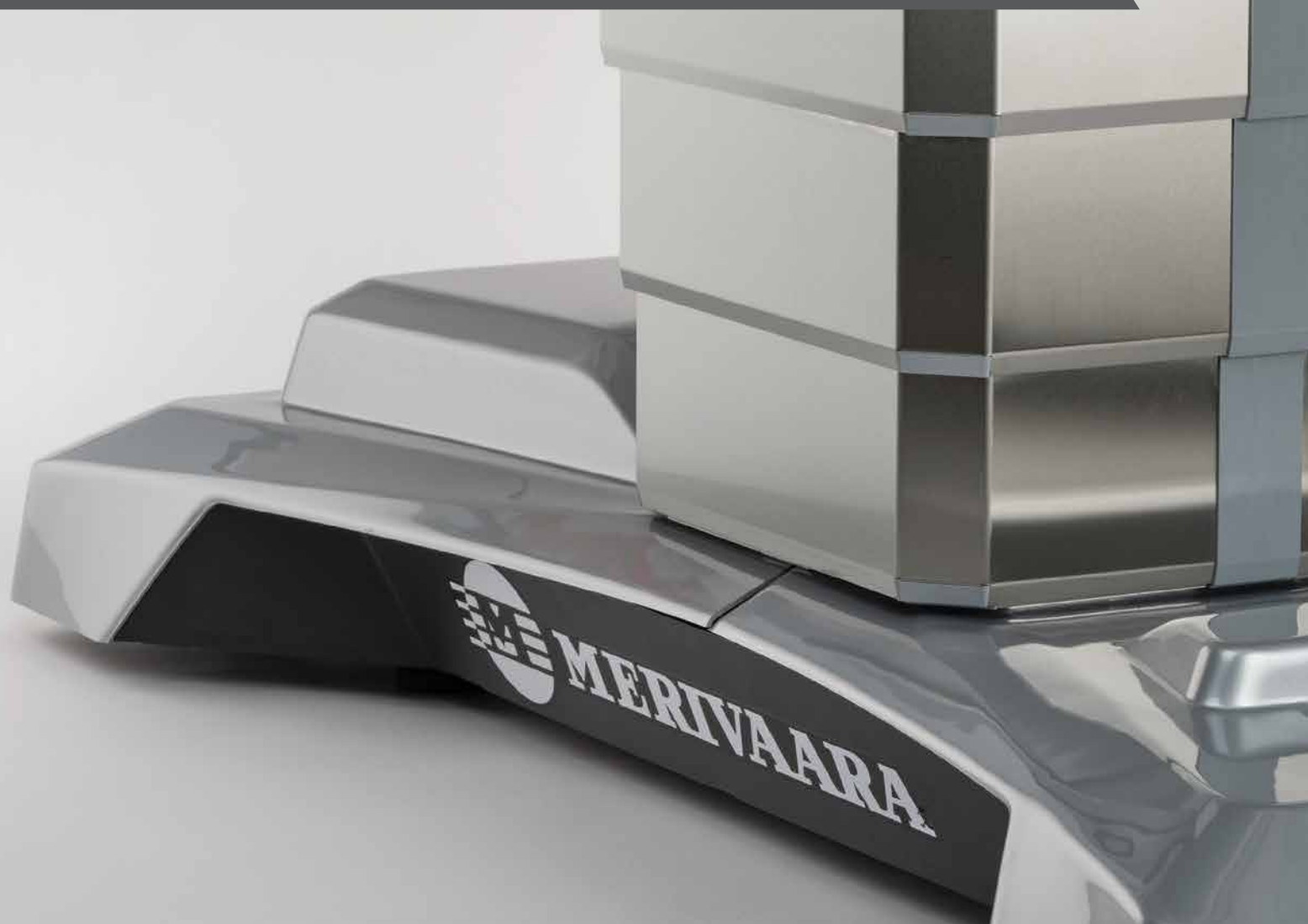


Usabilidad fluida


Desde 1901

“Además de la exquisita calidad del trabajo, hemos tomado el mayor interés en la funcionalidad del equipo. A este respecto, varios médicos comprometidos con la causa han contribuido con sus consejos, basados en sus apreciables experiencias.”

Juho Merivaara en 1926, fundador de Merivaara

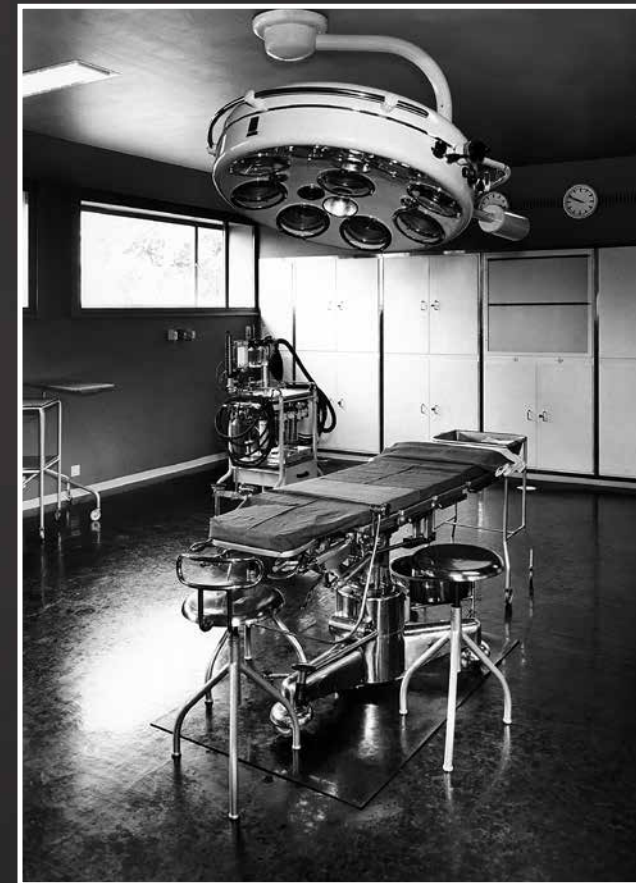


En una moderna sala de operaciones de la década de 1950, mesas y las luces se ajustaron manualmente.

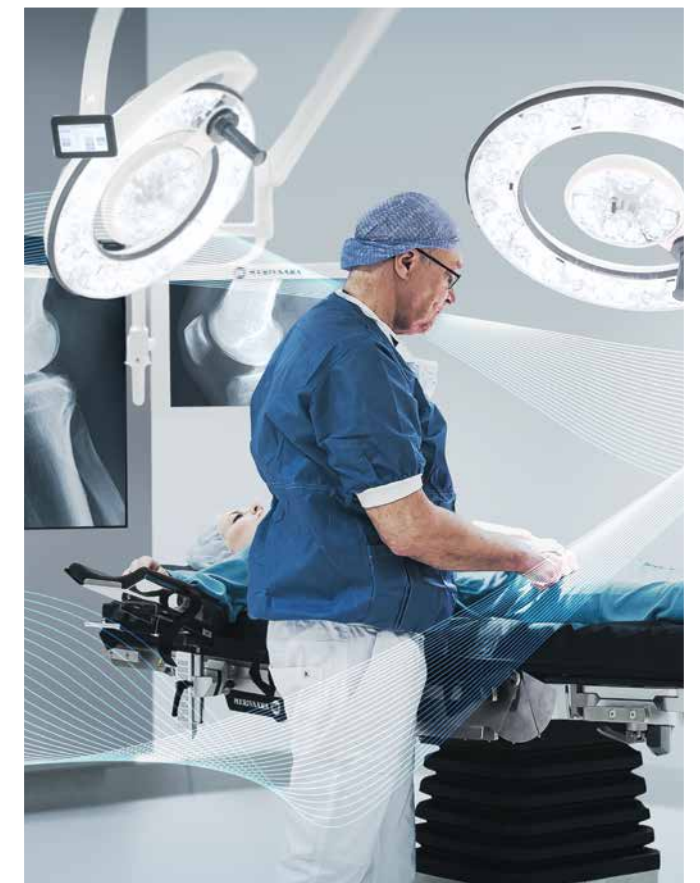

Estamos orgullosos de que los valores de la empresa hace 120 años estaban tan adelantados a su tiempo que todavía hoy pueden ser. Se aplica plenamente al diseñar nuevas soluciones innovadoras, para profesionales sanitarios. Esto se demuestra por nuestros últimos productos galardonados, el Q-Flow quirúrgico Light y la mesa de operaciones Smarter Practico con funcionalidad y facilidad de uso en el corazón del diseño. Nuestras interfaces de usuario se desarrollan junto con personal del hospital para que todos nuestros productos y sistemas ser utilizado intuitivamente.

A esto lo llamamos usabilidad fluida; el personal de la sala de operaciones puede centrarse en la atención al paciente, no en la gestión de tecnologías complejas. Los mejores cirujanos del mundo aprecian esto sobre todo.



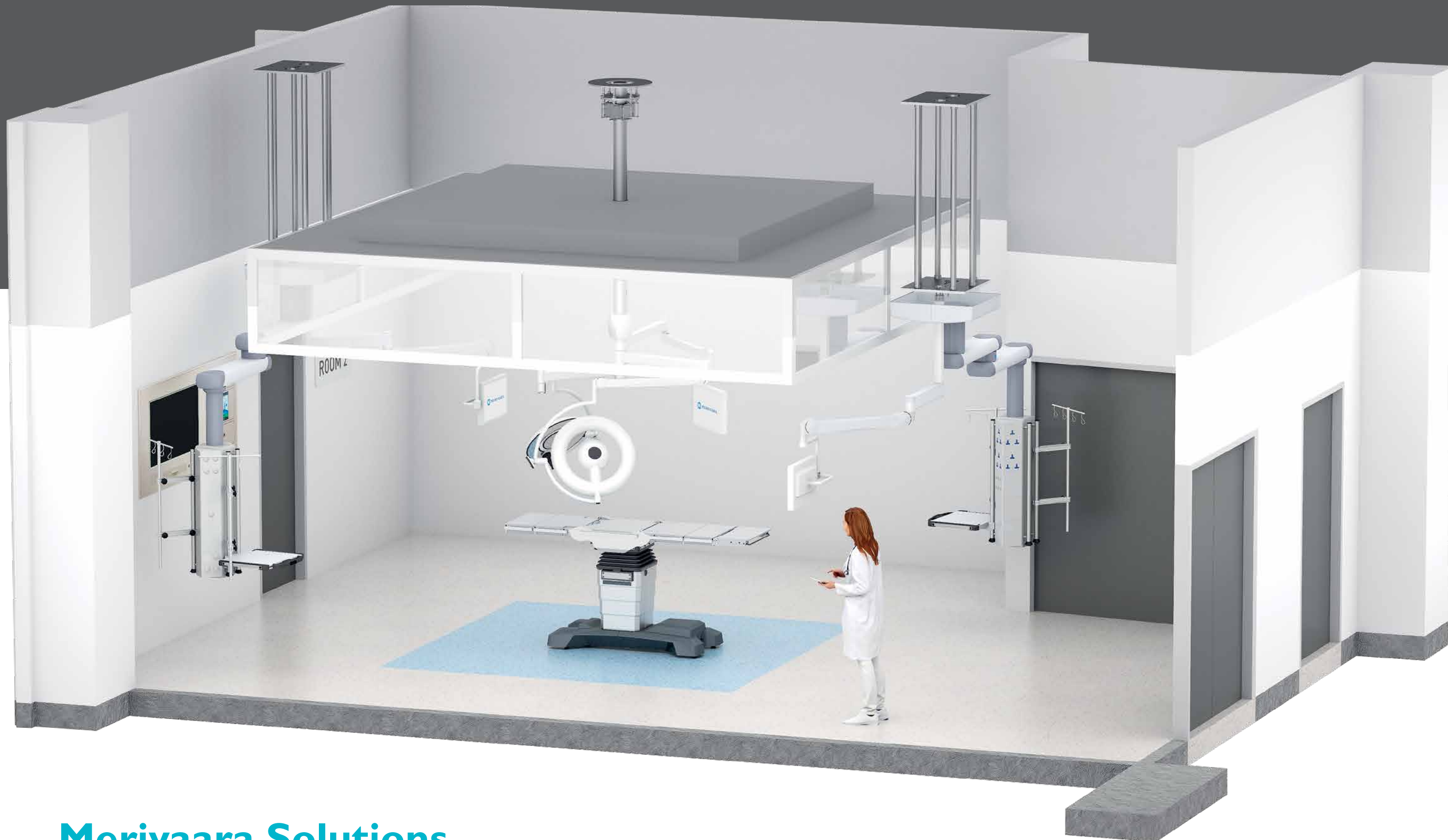

Merivaara Solutions

Merivaara Solutions ofrece a los quirófanos una amplia gama de productos, sistemas y servicios de alta calidad. Nuestras soluciones no solo garantizan la seguridad del paciente, sino que también brindan a los operadores de atención médica la mejor relación calidad-precio.

Al diseñar nuestras soluciones en torno a todo el equipo quirúrgico, es importante que escuchemos las necesidades del cliente. Esto nos permite asegurarnos de que el equipo pueda implementar los procedimientos de manera segura, rápida y confiable. Al mismo tiempo, se optimiza el flujo de trabajo y aumentará la productividad de todo el equipo.

Merivaara tiene una larga experiencia liderando e implementando proyectos en quirófanos. Para nosotros, mantener los proyectos programados y reducir los costos es extremadamente importante.

- LUCES QUIRURGICAS • LUCES DE EXAMEN
- MESAS DE OPERACIÓN • ACCESORIOS DE MESA
- SISTEMAS DE INTERGRACIÓN • MONITORES Y BRAZOS DE MONITOR
- COLGANTES • PROYECTOS • SERVICIOS MERIVAARA

Rapido

Versátil y funcional



CE MD

Reflejos

Amplio tablero con viscoelástica antiestática e higiénica viscoelástica de 80 mm, colchón que se adapta al cuerpo del paciente.

Ajustes de altura hidráulicos y ajustes asistidos por resorte de gas.

Mangos de ajuste Trendelenburg y Trendelenburg inverso.

Los pedales de ajuste de altura son de fácil acceso.

La base inferior está alojada en el interior de una carcasa higiénica y fácil de limpiar.

El ajuste de altura suave y silencioso permite un posicionamiento óptimo que ayuda a los pacientes con movilidad limitada a subir y bajar fácilmente de la mesa.

Movimiento fluido gracias a las ruedas gemelas antiestáticas más grandes que se deslizan suavemente sobre una variedad de superficies del suelo, cierre centralizado.

Rieles de casete de rayos X, buen acceso a la imagen.

Permite un fácil acceso al paciente, proporcionando posiciones de trabajo ergonómicas para el equipo de cirugía. Proporciona suficiente espacio para las piernas y una buena área de trabajo para el equipo quirúrgico.

Beneficios del Rapido

1. ACCESIBILIDAD FLUIDA

- El diseño único de la mesa permite un acceso más cercano al campo de operación.

2. SEGURIDAD DEL PACIENTE

- Barandillas de seguridad del paciente durante el transporte

3. FÁCIL DE USAR

- Maniobrabilidad fluida
- Fácil configuración
- Secciones de peso ligero
- El tamaño reducido de la base permite un ahorro de espacio efectivo

4. EFICIENCIA ECONÓMICA

- Económico
- Reduce las compras c



Controles de mesa y base

ESTÁNDAR RÁPIDO

Rapido es la mesa/carrito quirúrgico ideal para la unidad de cirugía de día ocupada. Ligero y fácil de usar y limpiar, el Rapido reduce la manipulación manual y mejora la eficiencia en el quirófano y la sala. El diseño abierto garantiza un acceso quirúrgico óptimo y un fácil uso de los equipos de rayos X y de imágenes.

Hay disponible una amplia gama de accesorios que le permitirán realizar una amplia variedad de cirugías ambulatorias y procedimientos quirúrgicos menores. El acceso al arco en C es rápido y fácil con Rapido, lo que lo hace ideal para el departamento de endoscopia.



RAPIDO PARA PROCEDIMIENTOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO

La mesa/carrito quirúrgico Rapido Upper Body está diseñada para varios procedimientos quirúrgicos de la parte superior del cuerpo. Este modelo ha mejorado el acceso a la parte superior del cuerpo del paciente, optimizando el espacio para las piernas y los pies del cirujano.

Rapido Upper Body está especialmente diseñado para varios tipos de cirugías, por ejemplo, procedimientos torácicos, otorrinolaringológicos, ginecológicos, urológicos y de manos y brazos. Los ajustes de la mesa que necesita el cirujano durante las operaciones de la parte superior del cuerpo se controlan convenientemente desde el extremo de la cabeza de la mesa.




Proceso de cirugía ambulatoria con Rapido

Una amplia gama de procedimientos quirúrgicos ahora se llevan a cabo en cirugía ambulatoria. La cirugía ambulatoria rápida y eficiente elimina la necesidad de que los pacientes permanezcan en el hospital durante la noche, lo que reduce en gran medida los costos operativos. El Rapido es un carro para pacientes, una mesa de operaciones y una cama de recuperación, todo en una sola unidad. Reduce los costos de equipo de capital y de mantenimiento o la necesidad de camas de sala que ahorran espacio valioso en las salas preoperatorias y de recuperación.

TRATAMIENTO PREOPERATORIO

- Permite una consulta preoperatoria paciente-cirujano más relajada
- El paciente está preparado para la cirugía sin necesidad de ser trasladado a una mesa quirúrgica

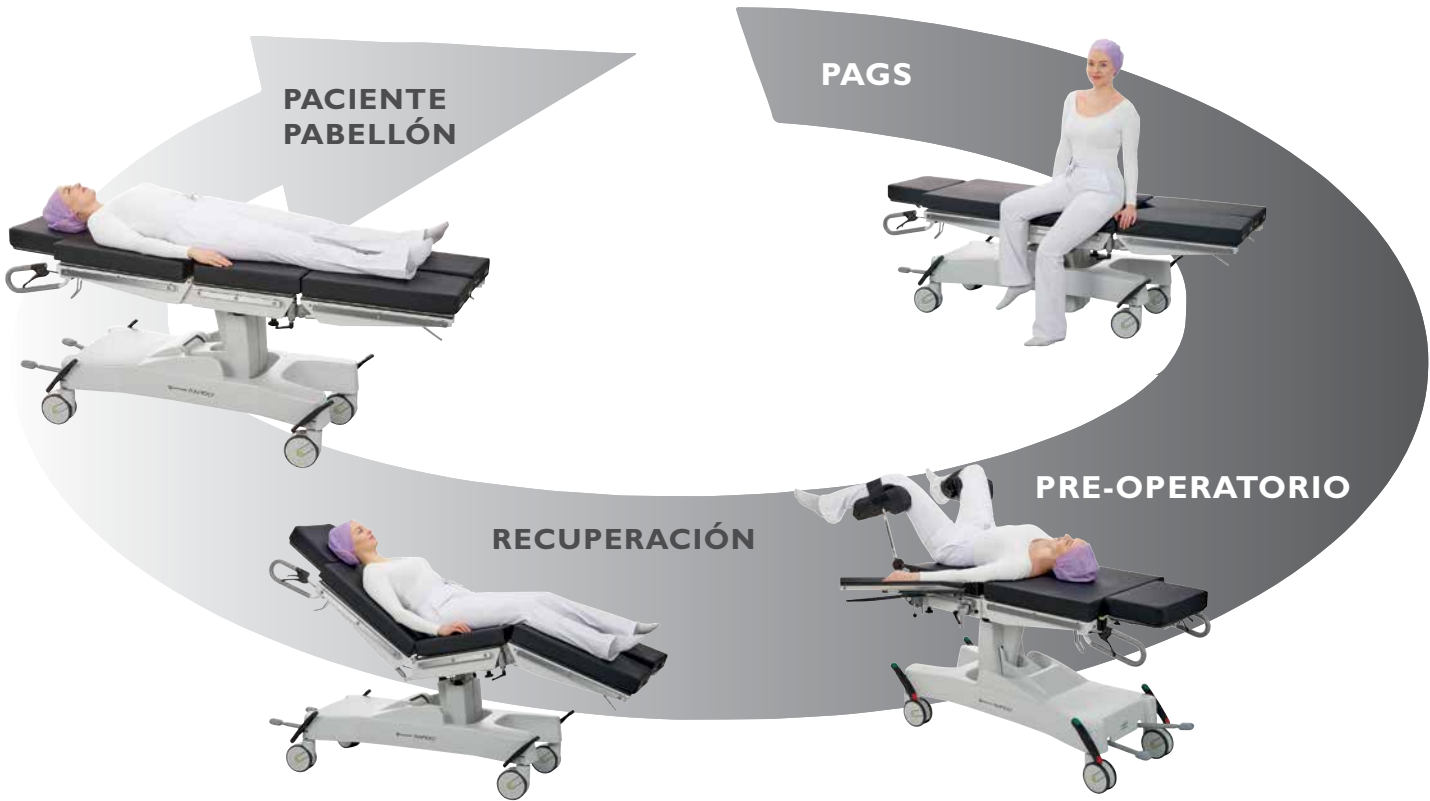

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

- La mesa móvil Rapido es fácil de colocar en el quirófano
- Maniobrabilidad fluida
- Rapido es compatible con la mayoría de los accesorios montados en rieles laterales.
- El reposacabezas modular se puede quitar fácilmente para permitir que la anestesia acceda a la cabeza del paciente durante los procedimientos ginecológicos y urológicos

CUIDADO POSTOPERATORIO

- El paciente puede ser transportado directamente a la sala de postoperatorio sin necesidad de transferirlo a una cama
- Rapido es de tamaño compacto: en la sala de recuperación caben más carros que camas
- Permite que el paciente del Rapido se recupere antes de ser transportado a la sala del hospital


Accesorios especiales



Sección de piernas dividida 1000 1826 I



Extensión Gyn/Uro 1000 18153

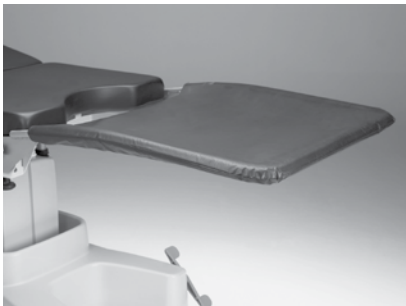

Reposapiés ligero 1000 18001




Bandeja de cassette de rayos X 1000 18126



Cuenco (6 L)
con drenaje 100 201572
sin drenaje 100 201571



Cesta de alambre para servicios
públicos 1000 18183

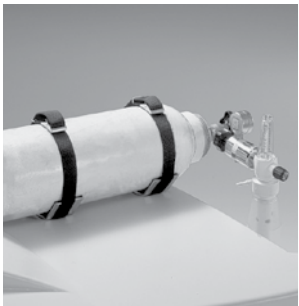


Soporte para botella de
oxígeno
5 L 1000 18189



Empuje las barras para
extremo del pie 18168





Portarrollos de papel para
Rapido 18572

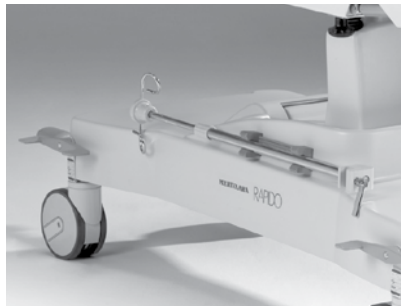

Varilla de infusión 749, número de pedido 1000 00749
Soporte de almacenamiento para barra de infusión
N.º de pedido 1000 18578




Una gran variedad de accesorios se pueden encontrar en el Merivaara Catálogo de accesorios.

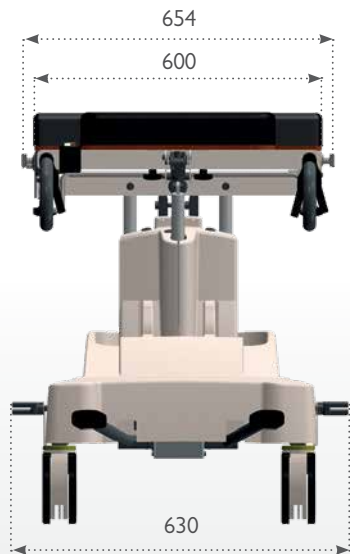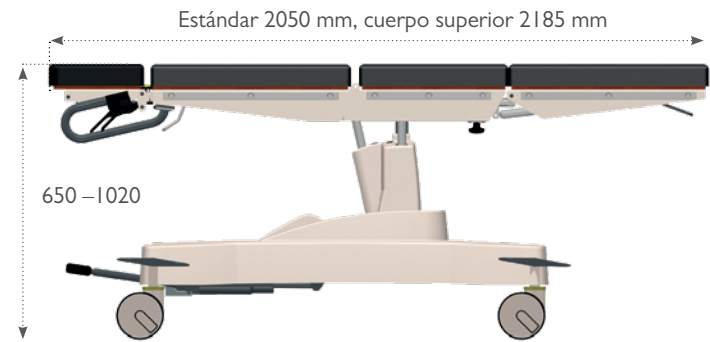


TRENDELENBURG / TENDENCIA INVERSA



AJUSTES DE LA SECCIÓN DE PIERNAS

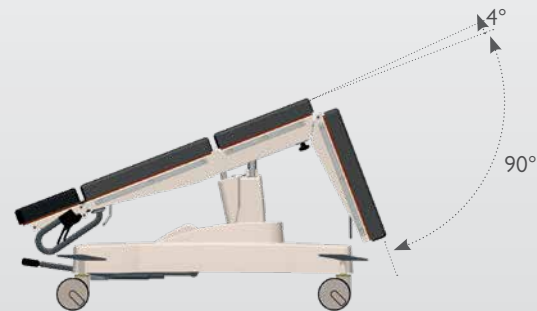

REGULACIÓN DE LA PARTE TRASERA ASISTIDA POR MUELLES DE GAS

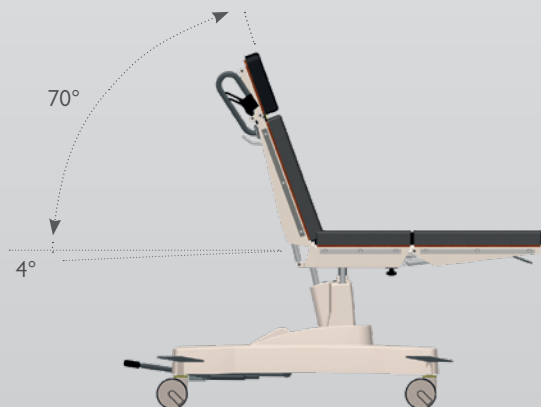

Especificaciones técnicas

	Estándar	Parte superior del cuerpo
Longitud	2050 mm	2185 mm
Ancho del colchón	600 mm	600 mm
Ancho total	654 mm	654 mm
Peso	125 kg	125 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	160 kg	160 kg
Altura, hidráulicamente con pedales	650–1020 mm	650–1020 mm
Trendelenburg, asistido por resorte de gas	-25°	-25°
Trendelenburg inverso, asistido por resorte de gas	+18°	+18°
Inclinación lateral, asistida por resorte de gas	± 15°	–
Ajuste de la sección trasera, asistido por resorte de gas	- 4°...+70°	- 4°...+70°
Ajuste de la sección de piernas, asistido por resorte de gas	- 90°...+4°	- 50°...+4°
Reposacabezas	- 40°...+25°	- 40°...+25°
Tamaño de las ruedas	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Ruedas antiestáticas: ruedas gemelas giratorias y lavables, pedal con dispositivo de bloqueo central	✓	✓
Número de secciones de la mesa	4 secciones / 5 secciones (sección de pie dividida)	4 secciones (sección de pierna de una pieza)
Secciones fijas de respaldo y asiento	✓	✓
Secciones de piernas y cabeza desmontables	✓	✓
Placa superior de laminado de alta presión translúcido de rayos X	✓	✓
Rieles de casetes de rayos X a lo largo de toda la superficie quirúrgica	✓	✓
Rieles accesorios de acero inoxidable	✓	✓
Carcasas de plástico ABS resistente a los golpes	✓	✓
Tipo de colchón	Espuma viscoelástica antiestática e higiénica viscoelástica 80 mm	Espuma viscoelástica antiestática e higiénica viscoelástica 80 mm
Garantía	2 años	2 años
Nombre oficial del producto:	Rapido	Rapido Upper Body

Fabricante: Merivaara Corp.



Health Technology with a Human Touch

Fabricado en Finlandia con respeto por
nuestra naturaleza única.



MERIVAARA CORP.

Lahti, Finland, Tel. +358 3 3394 611,
merivaara@merivaara.com www.merivaara.com

MERIVAARA EN TODO EL MUNDO

Sede de Merivaara, con I + D, producción, ventas, marketing y funciones de servicio posventa, se encuentran en Lahti, Finlandia. Merivaara tiene filiales en Suecia (Merivaara AB), Reino Unido (Merivaara Ltd) y una organización de ventas en Rusia. Además, los productos de Merivaara se venden en más de 120 países por una red de distribuidores.

El estado de la información, especificaciones e ilustraciones en esta publicación está indicada por la fecha de publicación. Mientras que se ha puesto el mayor cuidado en su compilación,

Merivaara Corp. no es responsable por errores u omisiones. Merivaara Corp. se reserva el derecho de realizar cambios en la tecnología, características, especificaciones y diseño de los equipos y modelos sin notificación. Consulte el sitio web de Merivaara para obtener las últimas especificaciones actualizadas y otra información.

Nota: Todas las posiciones ilustradas de los pacientes son solo ejemplos y se pueden realizar diferentes tipos de procedimientos en función de las necesidades personales o culturales. El posicionamiento adecuado del paciente debe ser realizado por un profesional capacitado.

Todas las marcas comerciales son propiedad de Merivaara a menos que se indique lo contrario. Patentes concedidas o pendientes.
©Merivaara Corp. DOC ID: 6172EN-2, Date: 11/2023