




Операционные столы

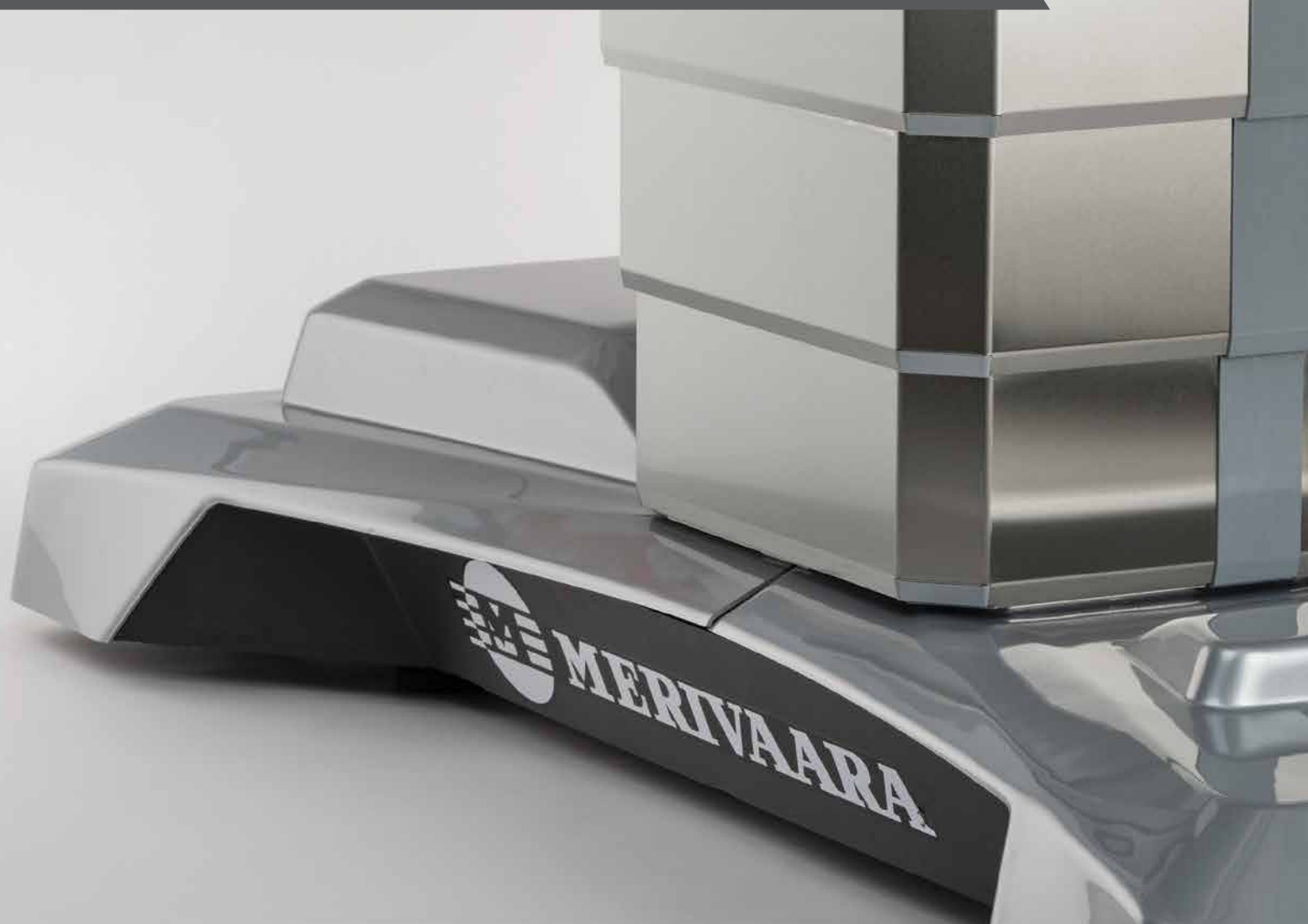

Удобство эксплуатации

С 1901 года

«Помимо высочайшего качества работы, мы уделяем максимальное внимание функциональности оборудования. В этой связи несколько врачей консультировали нас на основе своего бесценного опыта».

Юхо Мериваара, основатель компании Merivaara, 1926 г.



В современной операционной 1950-х годов столы и освещение регулировались вручную.


DESIGN
FROM
FINLAND



Мы гордимся тем, что ценности компании, определенные 120 лет назад, настолько опережали свое время, что и сегодня могут в полной мере использоваться при разработке новых инновационных решений для медицинских работников. Об этом свидетельствуют наши последние изделия, отмеченные наградами, — хирургический светильник Q-Flow и операционный стол Smarter Practico, в основе конструкции которых лежат функциональность и простота эксплуатации. Мы разрабатываем пользовательские интерфейсы совместно с сотрудниками больниц для обеспечения возможности интуитивного использования всех наших изделий и систем.

Мы называем такой подход «удобство эксплуатации»; он позволяет операционной бригаде сосредоточиться на лечении пациента, не отвлекаясь на управление сложными технологиями. Лучшие хирурги во всем мире ценят это.



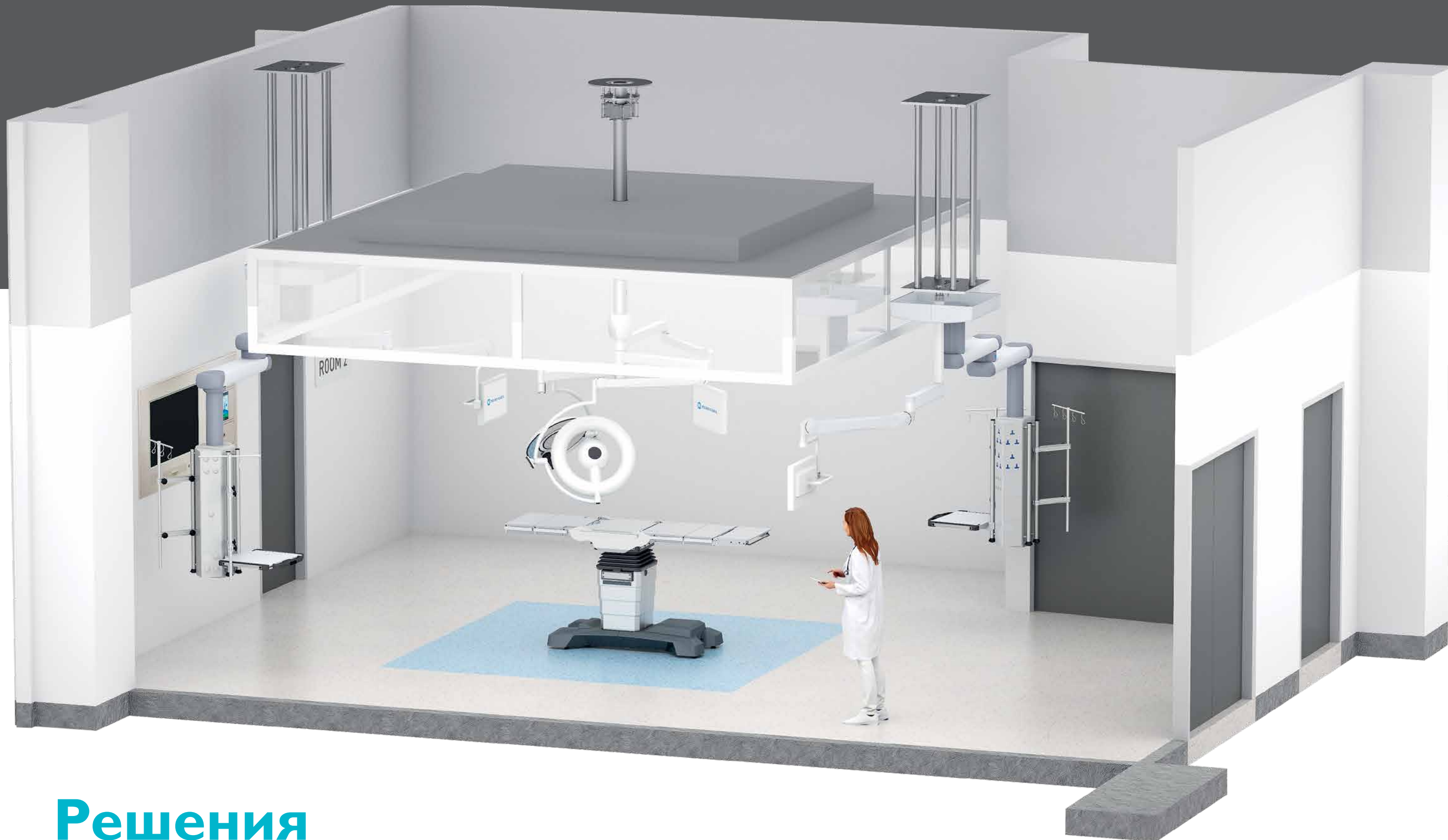

Решения

Решения Merivaara Solutions включают широкий спектр высококачественных продуктов, систем и услуг для операционных. Наши решения не только гарантируют безопасность пациентов, но и предлагают оптимальное соотношение цены и качества для медицинских учреждений.


При разработке решений для всей хирургической бригады очень важно понимать потребности заказчика. Это позволяет убедиться, что персонал может безопасно, быстро и надежно выполнять свои задачи. Также это позволяет оптимизировать рабочий процесс и повысить производительность всей группы.

Merivaara имеет большой опыт руководства и реализации проектов операционных. Для нас чрезвычайно важно соблюдение графика выполнения проектов и снижение затрат.

- ХИРУРГИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ • СМОТРОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ • ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТОЛОВ
- СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ • МОНИТОРЫ И КРОНШТЕЙНЫ
- ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ПРОЕКТЫ • УСЛУГИ MERIVAARA

Grand Promerix

для сложных рабочих процессов

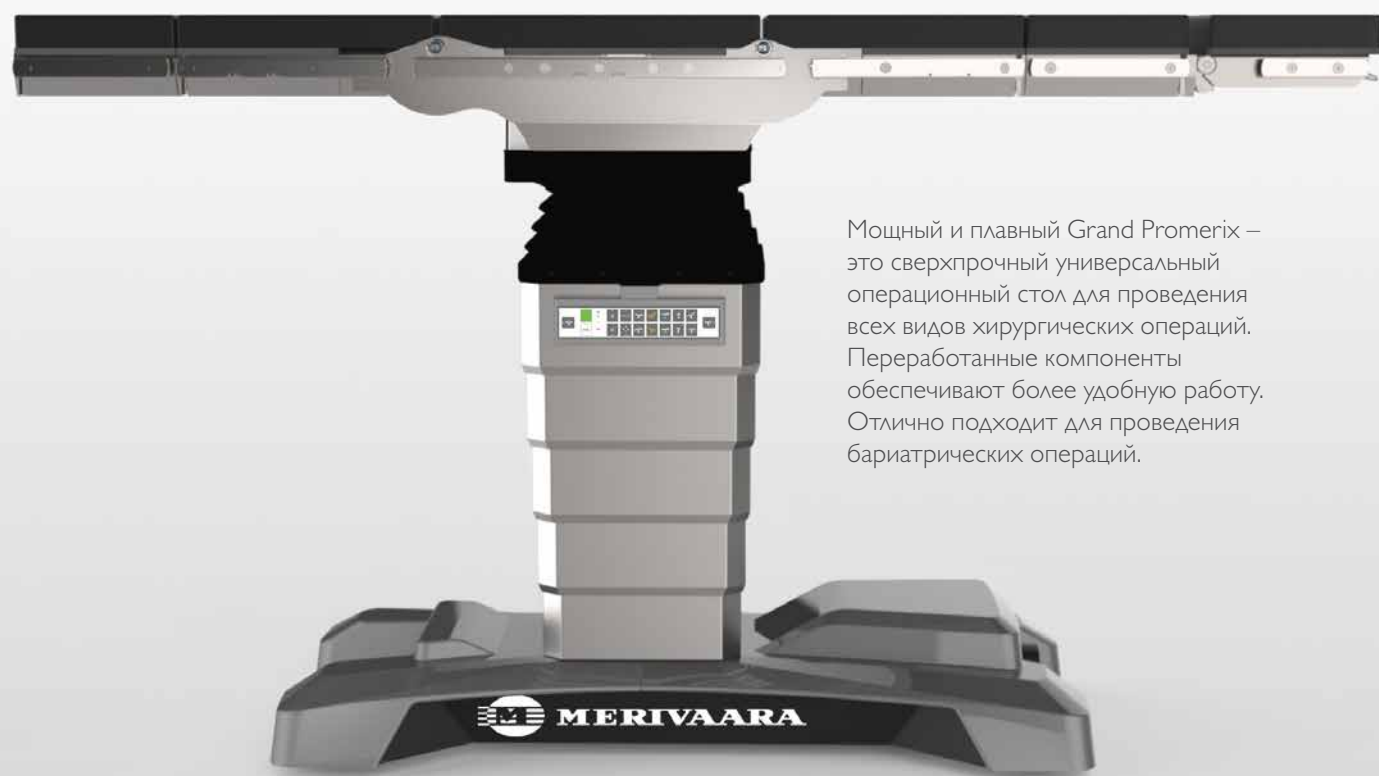

Мощный и плавный Grand Promerix – это сверхпрочный универсальный операционный стол для проведения всех видов хирургических операций. Переработанные компоненты обеспечивают более удобную работу. Отлично подходит для проведения бариатрических операций.

Главные особенности

Оптимизированный эргономичный дизайн обеспечивает повышенный уровень комфорта для всей хирургической бригады. Комфорт способствует концентрации, уверенности и более эффективному взаимодействию. Это означает эффективность.



Крышка основания также доступна в исполнении из нержавеющей стали
Удобный доступ для С-дуги



Преимущества Grand Promerix

1. УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА

Grand Promerix включает множество оптимизированных деталей для обеспечения лучшей эргономики, например, скрытые ролики меньшего размера и полукруглый вырез для увеличения пространства для ног. Оптимальный дизайн, ориентированный на удобство человека.



2. ДОСТУП ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С-ДУГИ

Обновленное тонкое основание обеспечивает идеальный доступ для С-дуги. Grand Promerix разработан в соответствии с высочайшими стандартами для операционного оборудования.



3. ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ

При переработке компонентов в первую очередь учитывались аспекты безопасности пациентов. Новые кожухи и секция сиденья, среди прочих усовершенствований, обеспечивают повышенный уровень гигиены и легкую очистку Grand Promerix.



4. ФИКСАТОР FLUENT™

Наша система фиксации Fluent удобна в использовании и надежна. Соединение выполняется одним движением.



ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Для ортопедии и травматологии Grand Promerix предлагает гибкое решение для любой операционной, где выполняются ортопедические операции. Ортопедическая приставка FLEXION обеспечивает исключительно простое позиционирование пациента. Полный доступ для С-дуги.



1.



3.

“Механизм Flexion крайне прост в настройке.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Артроскопия тазобедренного сустава
- Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава
- Процедуры на нижних конечностях: остеосинтез большеберцовой и бедренной кости
- Операции на кисти



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СТОЙКА ДЛЯ ФЕМОРАЛЬНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ 519512

Стойка для феморального вытяжения бедренной кости в боковом положении с механизмом Flexion.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРАКЦИОННЫЕ БАШМАКИ ROTEXSHOE®

Стабильность и гибкость не всегда являются взаимоисключающими свойствами, но имеют большое значение, особенно в области медицины. Они гарантируют безопасное и индивидуальное лечение пациентов и расширяют возможности хирургии. Специальные тракционные башмаки RotexShoe обладают всеми этими свойствами, а простота в эксплуатации облегчает вашу работу.



АРТРОСКОПИЯ ПЛЕЧА

Гибкое решение для любой операционной, где выполняются артроскопические операции. Большой вырез в спинной секции обеспечивает эргономичность для хирурга и пациента при проведении операции на плече. Вырез в спинной секции является достаточно большим для полного обзора верхней части спины и для движения руки пациента. С другой стороны, он обеспечивает надлежащую опору для пациента.



БОЛЬШОЙ ВЫРЕЗ В СПИННОЙ СЕКЦИИ
обеспечивает возможность движения плеча и руки во время операции.



ВЫРЕЗ В СПИННОЙ СЕКЦИИ
легко и быстро регулируется.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Восстановление вращательной манжеты плечевого сустава
- Операция Банкарта
- Устранение ортопедических повреждений
- Тотальное эндопротезирование плечевого сустава
- Восстановление ключицы
- Обратное тотальное эндопротезирование плечевого сустава



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТИ

позволяет вернуться в исходное операционное положение после сброса настроек стола для визуализации.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ КРЕСЛА 20127

Обеспечивает опору для пациента в полулежащем положении во время операции.



ПОДГОЛОВНИК-ШЛЕМ 30128

Многомерный шлем с налобным ремнем используется при проведении операций на плече в сочетании с секцией Beach Chair.



ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ


В сфере гинекологии и урологии Grand Promerix – это гибкое решение для любой операционной, где выполняются гинекологические и урологические операции. Высокая безопасная рабочая нагрузка, функция продольного смещения и большая область доступа С-дуги обеспечивают возможность рентгеноскопии тазовой области.



ОТЛИЧНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ХИРУРГА И АНЕСТЕЗИОЛОГА

Переработанная конструкция рамы и продуманные механизмы регулировки стола обеспечивают удобный доступ к пациенту для хирурга и анестезиолога.

ДОСТУПНЫ ДВЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ СЕКЦИИ

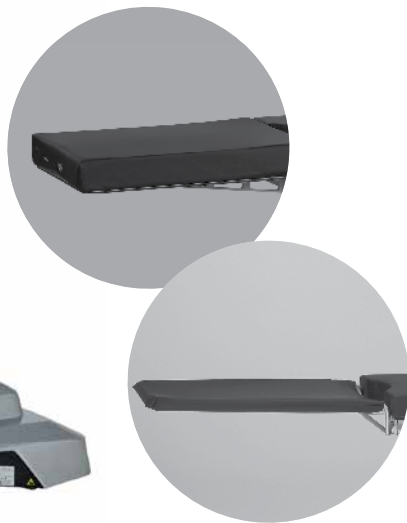

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Эндометриоидная хирургия
- Хирургия при опущении матки и стенок влагалища
- Выскабливание полости матки
- Лечение опухолей мышц матки (лечение миомы)
- Гистерэктомия
- Гидронефроз
- Лазерная хирургия предстательной железы
- Операция на мошонке
- Удаление семени (сперматозоидов)
- Исследование мочевого пузыря (цистоскопия)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

УПОРЫ ДЛЯ НОГ «САПОЖКИ» К-ТЕК

Обеспечивает исключительный доступ к тазовой области, возможность использования сапожка большого размера и более эффективный инфекционный контроль. Подходит для лечения детей и взрослых пациентов, а также для бариатрической хирургии.



ОБЛЕГЧЕННАЯ НОЖНАЯ СЕКЦИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 60204

Облегченная ножная секция повышает эргономичность работы операционного персонала. Компонент является очень легким и простым в обращении. Облегченная ножная секция крепится к операционному столу с помощью механизма фиксации Fluent, который не требует наклоняться над секцией при установке и снятии.

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Grand Promerix – это гибкое решение для всех нейрохирургических операций, где выполняются деликатные операции. Благодаря безопасной и удобной конструкции он эргономичен как для пациента, так и для хирургической бригады. Удобный дизайн создает оптимальные условия для визуализации. Система фиксации Fluent™ компании Merivaara обеспечивает возможность крепления различных принадлежностей.



БЕЗОПАСНОЕ И ПРОСТОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Grand Promerix позволяет использовать различные принадлежности для нейро- и спинальной хирургии. При необходимости возможно обратное позиционирование.

АДАПТЕР ПОДГОЛОВНИКА 60146

Совместим со всеми изделиями Doro для нейрохирургического применения. Легко устанавливается как на Grand Promerix, так и на Smarter Practico.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Ламинэктомия
- Дискэктомия
- Спондилодез
- Вертебропластика / кифопластика



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА DORO



СИСТЕМА DORO ДЛЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА



СИСТЕМА DORO ДЛЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА



СИСТЕМА DORO ДЛЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

СПИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Благодаря безопасной и удобной конструкции Grand Promerix является гибким решением для всех хирургических операций при проведении хирургических операций на позвоночнике. Он имеет конструкцию, эргономичную как для пациента, так и для хирургической бригады. Удобный дизайн создает оптимальные условия для визуализации. Система фиксации Fluent обеспечивает простое крепление секций из углеродного волокна.

УСТОЙЧИВЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ НЕЙТРАЛЬНОГО И СОГНУТОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Идеальное решение, например, для проведения операций на шее и пояснице, ламинэтомии, декомпрессии, торакальных операций на позвоночнике.



Рама Вильсона



Плавающая система для спинальной хирургии



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Ламинэтомия
- Спондилодез
- Дискэктомия
- Вертебропластика / кифопластика


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПОДГОЛОВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛЕЖАЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ CS



ЛИЦЕВАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ЛЕЖАЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ CS

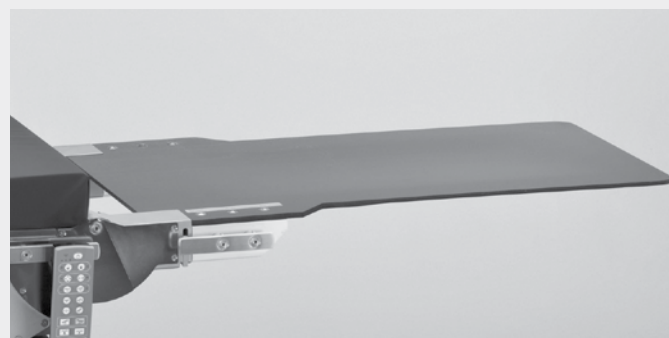


ФИБРОКАРБОНОВАЯ СПИННАЯ СЕКЦИЯ CF 60502

ТОРАКАЛЬНАЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

В области торакальной и сердечно-сосудистой хирургии Grand Promerix предлагает гибкое решение для любой операционной, где выполняются операции на сердечно-сосудистой системе. Длинная спинная секция из фиброкарбона обеспечивает высокое качество визуализации.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП ДЛЯ С-ДУГИ


Длинная спинная секция из фиброкарбона обеспечивает беспрепятственную визуализацию. Спинная секция из фиброкарбона является легкой и удобной в эксплуатации благодаря системе фиксации Merivaara Fluent™.

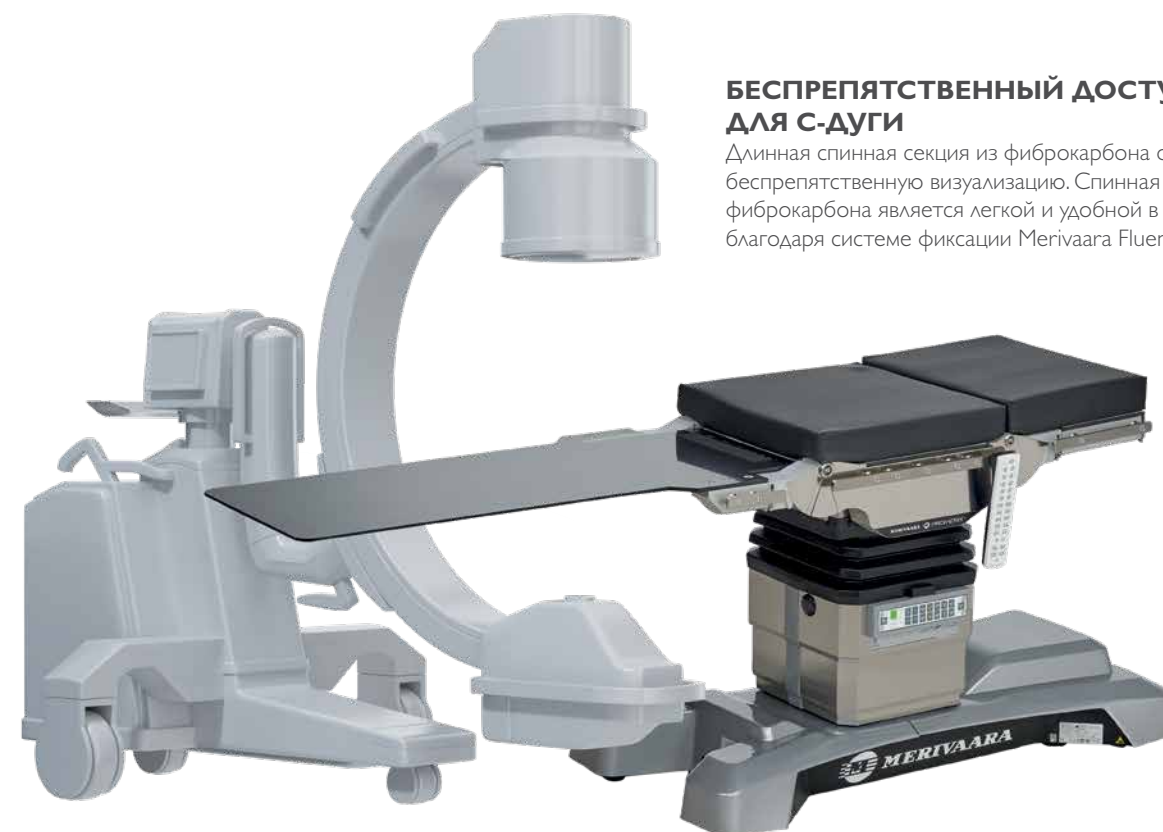


ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Ангиопластика
- Катетерная абляция
- Операции на сердечном клапане
- Установка стента

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

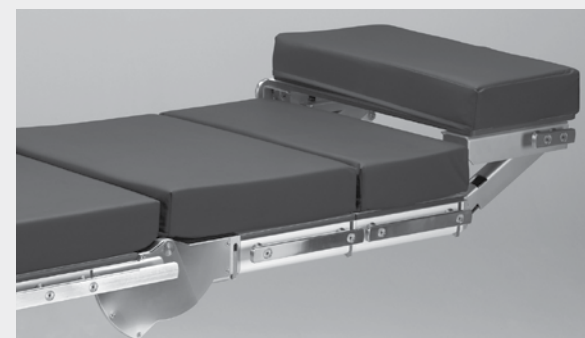

ПОДГОЛОВНИК 60142

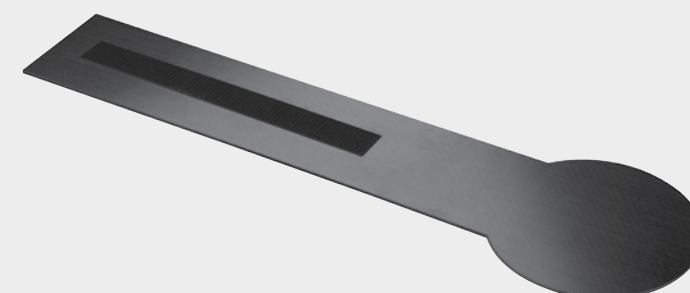

ПОДЛОКОТНИК ИЗ ЛАМИНАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (HPL) 60510

ПРОКТОЛОГИЯ

Специальные принадлежности обеспечивают безопасное позиционирование пациента, а также необходимые условия доступа как для хирурга, так и для операционной сестры.



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Колэктомия
- Илеостомия/колостомия
- Стриктуропластика
- Геморроидэктомия

“ Широкий ассортимент принадлежностей для различных условий применения в нашем каталоге принадлежностей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПОДЛОКОТНИК 19185

УПОРЫ ДЛЯ НОГ «САПОЖКИ» К-ТЕК

Обеспечивает исключительный доступ к тазовой области, возможность использования сапожка большего размера и более эффективный инфекционный контроль. Подходит для лечения детей и взрослых пациентов, а также для бариатрической хирургии.



ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ

Стол специально разработан для использования в педиатрии и обеспечивает удобный хирургический доступ при оперировании маленьких пациентов. Это повышает эргономичность работы операционной бригады. Он также обеспечивает превосходный доступ для С-дуги без препятствий со стороны опоры.



УДОБНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Педиатрическая секция предназначена для детской хирургии. Поверхность стола является более узкой по сравнению с другими секциями, что позволяет хирургам и медицинской бригаде находиться ближе к пациенту. Максимальный вес пациента – 40 кг. В комплект входит антистатический и вязкоэластичный матрас толщиной 80 мм.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

УПОРЫ ДЛЯ НОГ «САПОЖКИ» К-ТЕК 250 12814



ХИРУРГИЯ ПОЧКИ

Grand Promerix для хирургии почки – это простое и гибкое решение для операционных. Встроенный почечный валик помогает легко поместить пациента в нужное положение.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ПОЧЕЧНЫЙ ВАЛИК

Специальная спинная секция с почечным валиком проста в эксплуатации благодаря изогнутой ручке.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТОЛ

Стол может быть сконфигурирован в соответствии с любыми хирургическими задачами.



БЕЗОПАСНОЕ И ПРОСТОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Положения для сгибания / разгибания и полулежащее положение легко настраиваются благодаря отдельным кнопкам на пульте управления.


ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Операции по удалению легких
- Хирургия пищевода
- Чрескожная нефролитотомия/ нефролитотрипсия (туннельная хирургия)
- Операции по уменьшению объема легких
- Частичная нефрэктомия или нефронсберегающая хирургия

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



**ПОДГОЛОВНИК ДЛЯ ПОЧЕЧНОЙ
И ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 60147**

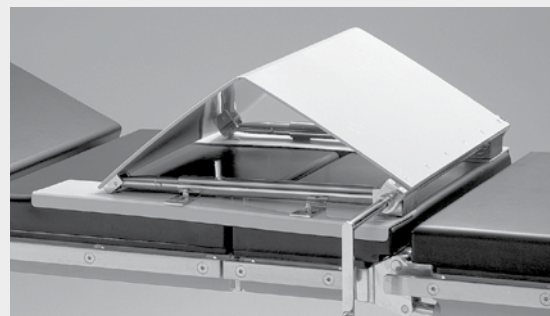

**НЕЗАВИСИМЫЙ ПОЧЕЧНЫЙ ВАЛИК
19280**

БАРИАТРИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Гибкое решение для любой операционной, где выполняются минимально инвазивные операции. Благодаря высокой безопасной рабочей нагрузке, функции продольного смещения и гибкому позиционированию Grand Promerix является безопасным и эргономичным решением как для пациента, так и для хирургической бригады.



ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Гибкие сочленения Grand Promerix обеспечивают оптимальные эргономические решения.



НИЗКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА

В современной операционной важна возможность адаптации оборудования к любой ситуации. Благодаря минимальной высоте 30 см Promerix является идеальным решением для бариатрической гастрохирургии.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Бариатрическая хирургия
- Операции по удалению грыжи
- Лапаротомия
- Лапароскопия
- Удаление опухолей

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

УПОРЫ ДЛЯ НОГ «САПОЖКИ» К-ТЕК

Обеспечивает исключительный доступ к тазовой области, возможность использования сапожка большего размера и более эффективный инфекционный контроль. Подходит для лечения детей и взрослых пациентов, а также для бариатрической хирургии.



**РАЗДЕЛЬНАЯ НОЖНАЯ
СЕКЦИЯ 60484**

Индивидуальные решения

Для проведения различных хирургических операций

Секции для голени (требуется 60225 или 60425)

Секции для бедра (крепление к секции сиденья)

Секции для нижней части спины (крепление к секции сиденья)

Секции для верхней части спины, адаптеры и подголовники с фиксатором Fluent

Подголовники

Адаптер DORO (присоединение непосредственно к боковым направляющим)

№	Кат. №	Наименование	Размеры	Масса
1.	1000 30248	Короткая раздельная ножная секция, с пневмоприводом		
2.	1000 30147	Цельная ножная секция, с пневмоприводом		
3.	1000 60475	Длинная раздельная ножная секция, с пневмоприводом	594 x 880 x 260 мм	
4.	1000 60250	Секция 25	540 x 250 x 80 мм	7,6 кг
5.	1000 60240	Секция 40	540 x 400 x 80 мм	9,1 кг
6.	1000 60425	Гинекологическая секция 25	540 x 250 x 80 мм	5,3 кг
7.	1000 60440	Гинекологическая секция 40	540 x 400 x 80 мм	8,9 кг
8.	1000 145480	Короткая раздельная ножная секция с двойным сочленением		7,5 кг
9.	1000 60484	Раздельная ножная секция, 4 элемента	540 x 865 x 230 мм	25 кг
10.	1000 60201	Облегченная подставка для ног 60201	500 x 900 мм	5,2 кг
11.	1000 60225	Короткая секция 25	540 x 250 x 80 мм	5,4 кг
12.	1000 60502	Фиброкарбоновая секция 60502	1200 x 540 мм	
13.	1000 60204	Облегченная ножная секция с электроприводом 60204	540 x 630 x 80 мм	4,9 кг
14.	100060525	Спинная секция для положения Beach Chair	540 x 650 x 80 мм	19,6 кг
12.	100060325	Секция для верхней части спины для ЛОР-хирургии 60325		
13.	1000 60140	Подголовник 60140	540 x 300 x 80 мм	6,3 кг
14.	1000 60142	Подголовник 60142	540 x 300 x 80 мм	6,4 кг
15.	1000 60146	Адаптер подголовника 60146		2,5 кг
16.	1000 30128	Подголовник-шлем для положения Beach Chair 30128		4,3 кг
17.	1000 30126	Подголовник для положения Beach Chair 30126		4,6 кг
18.	1000 18101	Подголовник 18101	300 x 408 x 80 мм	4,1 кг
19.	1000 18150 1000 18151	Подголовник для ЛОР/офтальмологической хирургии 18150 или 18151	225 x 290 x 60 мм	2,8–3,25 кг
20.	1000 18143	Подголовник для ЛОР-хирургии 18143	245 x 242 x 40 мм	3,4 кг
21.	1000 00142	Узкий подголовник 142	275 x 206 x 50 мм	4,1 кг
22.	1000 00141	Широкий подголовник 141	275 x 406 x 50 мм	4,5 кг
23.	1003 00700	Адаптер DORO		
24.	1010 01100	Алюминиевая подголовная система DORO		
25.	1003 00900	Подковообразный подголовник DORO		



Мы предлагаем два типа матрасов:

Вязкоэластичная пена (VEF) обеспечивает повышенный уровень комфорта для пациента и препятствует образованию пролежней. Поверхность материала сваривается ультразвуком для предотвращения проникновения жидкости.

VEF
Матрас

Матрасы из полиуретана (IS) – это не требующие ухода решения для сложных условий.

IS
Матрас

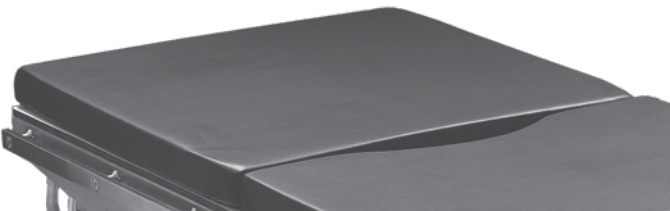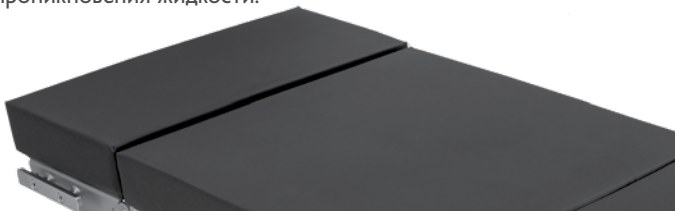

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА (*)



МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА (**)



НОЖНАЯ И СПИННАЯ СЕКЦИИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



БОКОВОЙ НАКЛОН



УГОЛ ТРЕНДЕЛЕНБУРГА



СМЕЩЕНИЕ В СТОРОНУ
НОГ 210 MM



СМЕЩЕНИЕ В СТОРОНУ
ГОЛОВЫ 200 MM



(*) С ПРОДОЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ (**) БЕЗ ПРОДОЛЬНОГО СМЕЩЕНИЯ

Технические характеристики

	С продольным смещением	Без продольного смещения
Длина (поверхность стола)	2100 мм	2100 мм
Ширина (поверхность стола)	540 мм	540 мм
Ширина (основание)	652 мм	652 мм
Регулировка высоты	650–1110 мм	610–1070 мм
Макс. вес пациента	275 кг	325 кг
Безопасная рабочая нагрузка (SWL)	275 кг	325 кг
Положение Тренделенбурга	-35°	-35°
Положение обратного Тренделенбурга	+35°	+35°
Регулировка подголовника	-45 – +45°	-45 – +45°
Регулировка спинной секции	-45 – +80°	-45 – +80°
Регулировка ножной секции	-105 – +70°	-95 – +70°
Размер роликов	80 мм	80 мм
Частота	47–63 Гц	47–63 Гц
Входное напряжение	100–240 В перем. тока	100–240 В перем. тока
Масса	325 кг	300 кг
Продольное смещение стола	410 мм	
Боковой наклон	-25 – +25°	20 – 20°
Длина нижней части рамы	1317 мм	1317 мм
Клиренс над полом	25 мм	25 мм
Макс. грузоподъемность	490 кг	490 кг
Код изделия	100060000	100060000
Официальное наименование изделия: Promerix		

Производитель: Merivaara Corp.



Технологии здравоохранения с человеческим подходом

Сделано в Финляндии с уважением
к нашей уникальной природе.



MERIVAARA CORP.

Холмола, Финляндия, тел. +358 3 3394 611,
merivaara@merivaara.com www.merivaara.com

MERIVAARA В МИРЕ

Штаб-квартира компании Merivaara, где расположены научно-исследовательское и производственное подразделения, а также отделы продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания, находится в городе Холмола, Финляндия. Merivaara имеет дочерние компании в Швеции (Merivaara AB) и Великобритании (Merivaara Ltd), а также торговую организацию в России. Кроме того, продукция Merivaara продается в более чем 120 странах через сеть дистрибьюторов.

Статус информации, технических характеристик и иллюстраций в данной публикации обозначен датой публикации. Хотя документ

составлялся с особой тщательностью, Merivaara Corp. не несет ответственности за любые ошибки или упущения. Merivaara Corp. оставляет за собой право вносить изменения в технологии, функции, технические характеристики и дизайн оборудования и моделей без предварительного уведомления. Посетите веб-сайт Merivaara для получения последних обновленных технических характеристик и другой информации.

Примечание: все проиллюстрированные положения пациента приведены лишь в качестве примера, и в зависимости от личных или культурных потребностей могут выполняться различные процедуры. Правильное позиционирование пациента должно осуществляться подготовленным специалистом.

Все товарные знаки являются собственностью Merivaara, если не указано иное. Патенты получены или находятся на рассмотрении.

©Merivaara Corp. DOC ID: 6172EN-2, дата: 11/2023