




Операционные столы

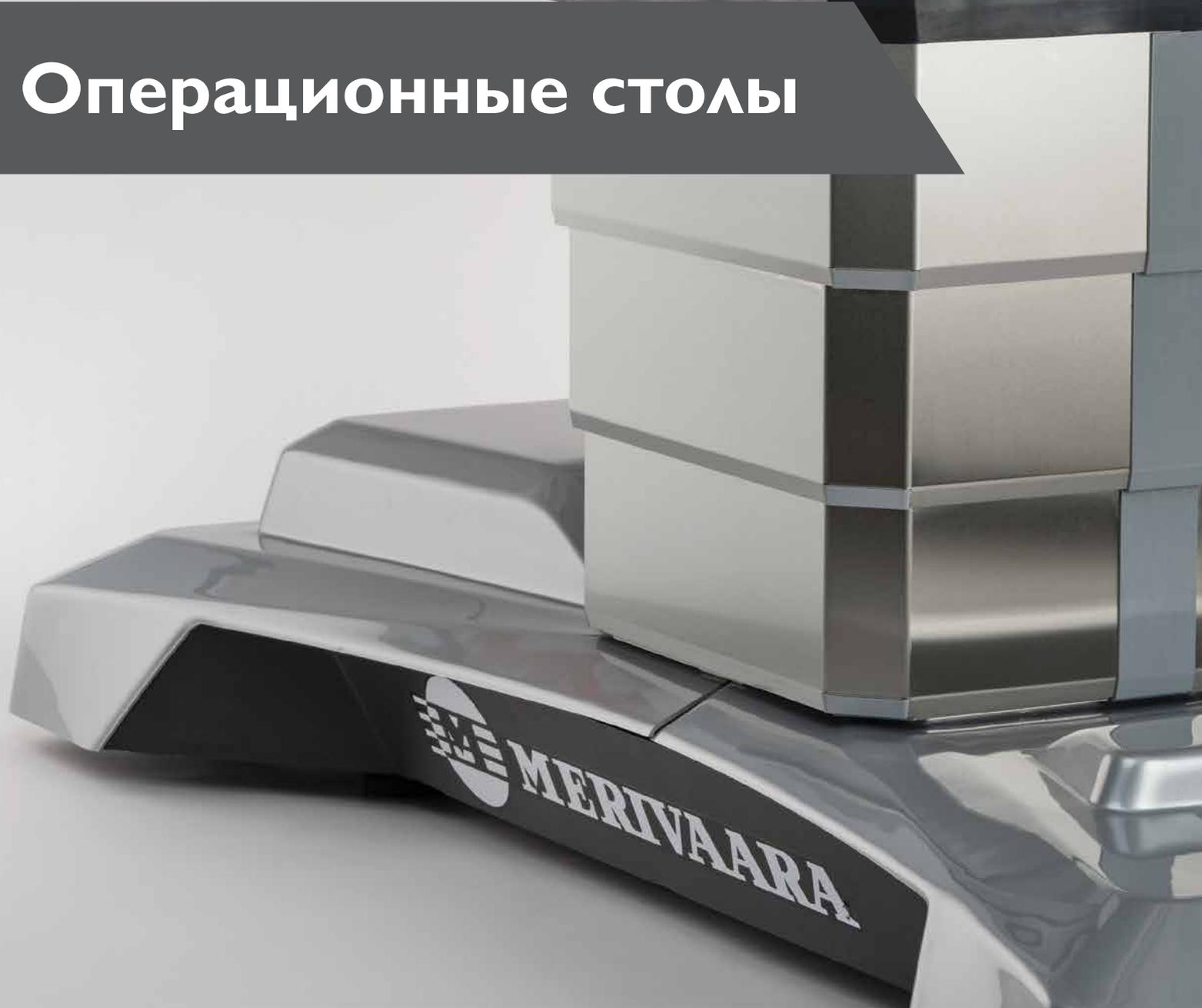


Удобство эксплуатации

С 1901 года

«Помимо высочайшего качества работы, мы уделяем максимальное внимание функциональности оборудования. В этой связи несколько врачей консультировали нас на основе своего бесценного опыта».

Юхо Мериваара, основатель компании Merivaara, 1926 г.

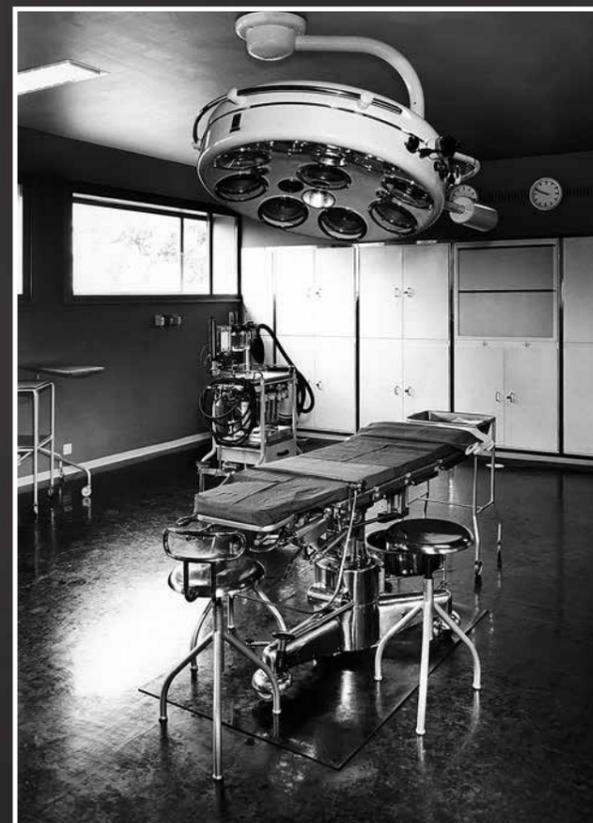

В современной операционной 1950-х годов столы и освещение регулировались вручную.


**DESIGN
FROM
FINLAND**



Мы гордимся тем, что ценности компании, определенные 120 лет назад, настолько опережали свое время, что и сегодня могут в полной мере использоваться при разработке новых инновационных решений для медицинских работников. Об этом свидетельствуют наши последние изделия, отмеченные наградами, — хирургический светильник Q-Flow и операционный стол Smarter Practico, в основе конструкции которых лежат функциональность и простота эксплуатации. Мы разрабатываем пользовательские интерфейсы совместно с сотрудниками больниц для обеспечения возможности интуитивного использования всех наших изделий и систем.

Мы называем такой подход «удобство эксплуатации»; он позволяет операционной бригаде сосредоточиться на лечении пациента, не отвлекаясь на управление сложными технологиями. Лучшие хирурги во всем мире ценят это.



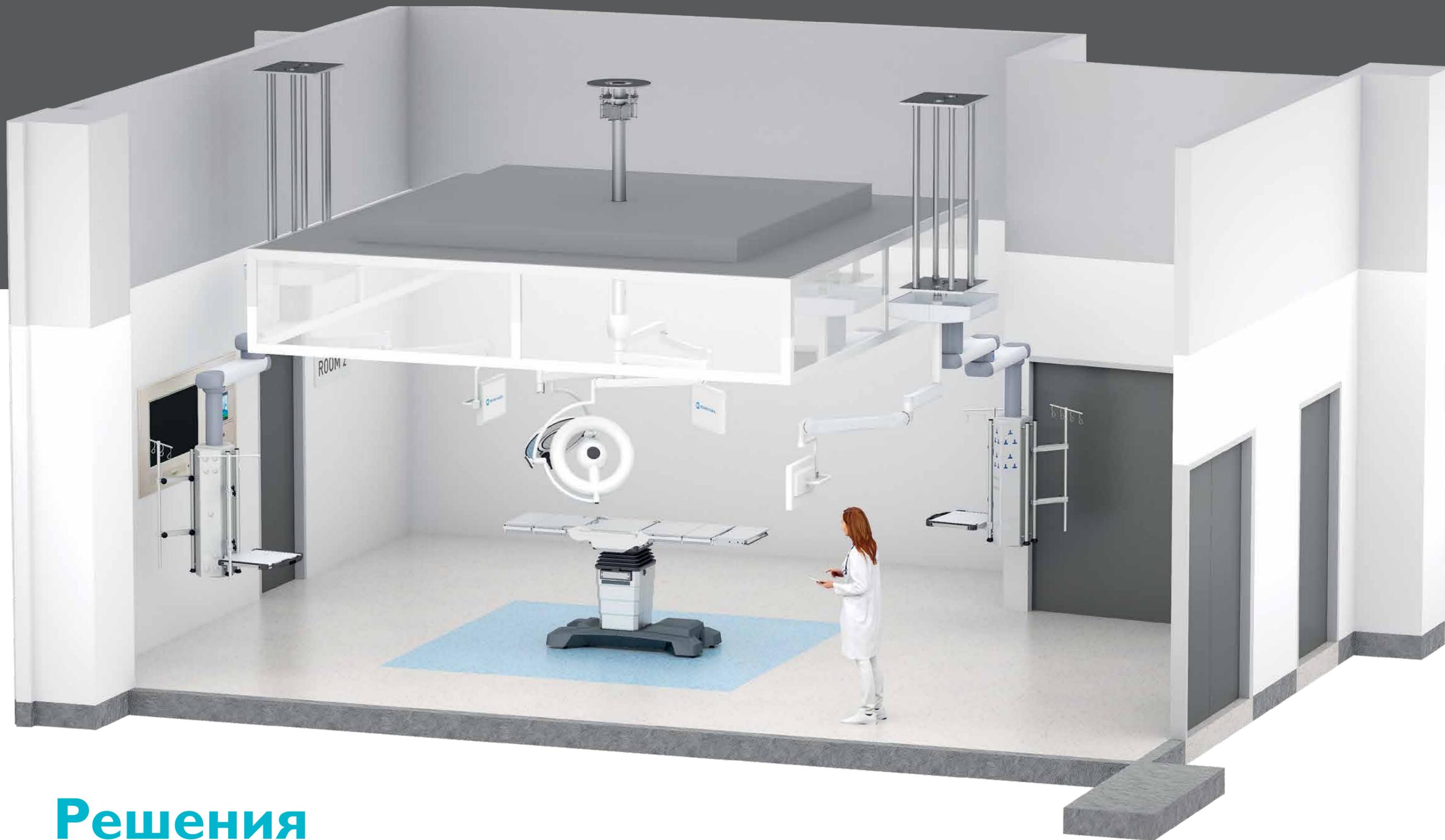

Решения

Решения Merivaara Solutions включают широкий спектр высококачественных продуктов, систем и услуг для операционных. Наши решения не только гарантируют безопасность пациентов, но и предлагают оптимальное соотношение цены и качества для медицинских учреждений.

При разработке решений для всей хирургической бригады очень важно понимать потребности заказчика. Это позволяет убедиться, что персонал может безопасно, быстро и надежно выполнять свои задачи. Также это позволяет оптимизировать рабочий процесс и повысить производительность всей группы.

Merivaara имеет большой опыт руководства и реализации проектов операционных. Для нас чрезвычайно важно соблюдение графика выполнения проектов и снижение затрат.

- ХИРУРГИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ • СМОТРОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ • ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТОЛОВ
- СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ • МОНИТОРЫ И КРОНШТЕЙНЫ
- ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ПРОЕКТЫ • УСЛУГИ MERIVAARA

Practico Manual


Хирургический операционный стол

Practico Manual – это универсальный стол с ручным управлением, который предлагает широкий спектр конфигураций для проведения всех видов хирургических операций. Стол Practico Manual рассчитан на пациентов различного веса благодаря грузоподъемности 400 кг и SWL 180 кг. Уникальная конструкция основания обеспечивает более близкий доступ к операционному полю, одновременно снижая нагрузку на поясницу у хирургической бригады. Конструкция, выполненная из нержавеющей стали, позволяет использовать стол даже в сложных климатических условиях.



Главные особенности

Practico Manual представляет собой удобный в эксплуатации хирургический стол с ручным управлением. Благодаря высоким показателям грузоподъемности и безопасной рабочей нагрузки он является идеальным решением в самых сложных условиях.

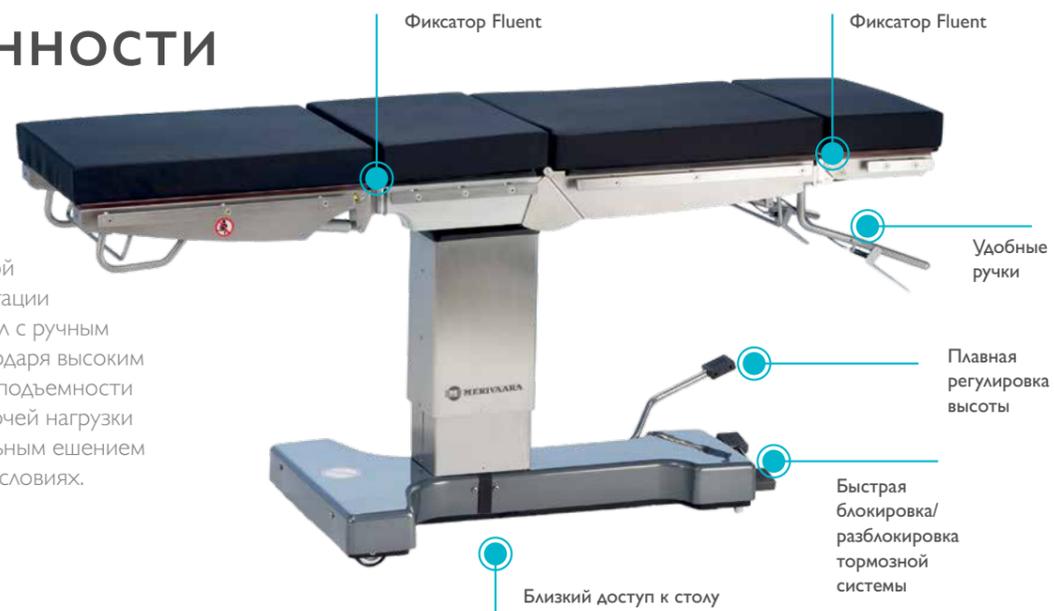

Преимущества Practico Manual



1. СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

Уникальная конструкция основания обеспечивает более близкий доступ к операционному полю.

2. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Полумодульная конструкция стола Practico Manual обеспечивает возможность конфигурации для выполнения различных хирургических задач.



3. БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА

Practico Manual быстро настраивается даже в самых сложных условиях.



4. СОВМЕСТИМОСТЬ

Этот символ указывает на совместимость со всеми принадлежностями Merivaara.



5. ГОТОВНОСТЬ К ЛЮБЫМ УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Конструкция, выполненная из нержавеющей стали, позволяет использовать стол даже в сложных климатических условиях.

Позиционирование пациента



Боковое позиционирование с почечным валиком при почечной/торакальной хирургии.



Боковое позиционирование с изгибом без использования почечного элеватора.



Литотомическое позиционирование для проведения гинекологических и урологических хирургических операций.



Реверсивный режим



Положение лежа



Положение Фовлера с использованием раздельной ножной секции для лапароскопической и бариатрической хирургии.



Ортопедическая приставка 19300 для нижних конечностей. Также подходит для проведения плановых операций.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



СТАНДАРТНАЯ НАЧАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ TRENGUARD 450 HYBRID



РАЗДЕЛЬНЫЕ НОЖНЫЕ СЕКЦИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



КРУГЛАЯ БОКОВАЯ ОПОРА MV-11651



ПРЯМОУГОЛЬНАЯ БОКОВАЯ ОПОРА MV-11652



БОКОВАЯ ОПОРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУКИ/НОГИ 60485

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

710–1020 ММ



РАЗГИБАНИЕ



СГИБАНИЕ



ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕНДЕЛЕНБУРГА



ПОЛОЖЕНИЕ ОБРАТНОГО ТРЕНДЕЛЕНБУРГА



БОКОВОЙ НАКЛОН, РЕГУЛИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРУЖИНЫ

±20°



Технические характеристики

	При использовании в обычном режиме	При использовании в реверсивном режиме
Безопасная рабочая нагрузка (SWL)	180 кг	180 кг
Макс. грузоподъемность	400 кг	400 кг
Диапазон регулировки высоты (без матраса)	710–1020 мм	710–1020 мм
Регулировка высоты	Гидравлический механизм	Гидравлический механизм
Боковые направляющие	Euro, UK, US	Euro, UK, US
Положение Тренделенбурга	25°	18°
Положение обратного Тренделенбурга	18°	25°
Боковой наклон	± 20°	± 20°
Регулировка спинной секции	- 30° – +70°	–
Регулировка ножной секции	- 90° – +15°	–
Спинная и ножная секции, боковой наклон и положение Тренделенбурга	Механическая система с пневматической пружиной	Механическая система с пневматической пружиной
Официальное наименование изделия: Practico Manual		

Производитель: Merivaara Corp.



Технологии здравоохранения с человеческим подходом

Сделано в Финляндии с уважением
к нашей уникальной природе.



MERIVAARA CORP.

Холмола, Финляндия, тел. +358 3 3394 611,
merivaara@merivaara.com www.merivaara.com

MERIVAARA В МИРЕ

Штаб-квартира компании Merivaara, где расположены научно-исследовательское и производственное подразделения, а также отделы продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания, находится в городе Холмола, Финляндия. Merivaara имеет дочерние компании в Швеции (Merivaara AB) и Великобритании (Merivaara Ltd), а также торговую организацию в России. Кроме того, продукция Merivaara продается в более чем 120 странах через сеть дистрибьюторов.

Статус информации, технических характеристик и иллюстраций в данной публикации обозначен датой публикации. Хотя документ

составлялся с особой тщательностью, Merivaara Corp. не несет ответственности за любые ошибки или упущения. Merivaara Corp. оставляет за собой право вносить изменения в технологии, функции, технические характеристики и дизайн оборудования и моделей без предварительного уведомления. Посетите веб-сайт Merivaara для получения последних обновленных технических характеристик и другой информации.

Примечание: все проиллюстрированные положения пациента приведены лишь в качестве примера, и в зависимости от личных или культурных потребностей могут выполняться различные процедуры. Правильное позиционирование пациента должно осуществляться подготовленным специалистом.

Все товарные знаки являются собственностью Merivaara, если не указано иное. Патенты получены или находятся на рассмотрении.

©Merivaara Corp. DOC ID: 6172EN-2, дата: 11/2023