



Operationsbord

 **MERIVAARA**

Fluent usability

Sedan 1901

"I tillägg till den höga tillverkningskvaliteten, ägnar vi mycket arbete åt att optimera utrustningens funktionalitet. Som ett led i detta har vi bett ett stort antal erfarna läkare att bidra med råd och synpunkter på produkterna."

Juho Merivaara 1926, Merivaaras grundare



I moderna operationssalar på 1950-talet justerade personalen bord och belysning för hand.


**DESIGN[®]
FROM
FINLAND**



Vi är stolta över att företagets grundvärden för 120 år sedan var så långt före sin tid att de fortfarande kan tillämpas fullt ut vid utveckling av nya innovativa lösningar för vårdpersonal. Och dessa värden återspeglas i våra senaste prisbelönta produkter, Q-Flow operationslampa och operationsbordet Smarter Practico, som har utvecklats för optimal funktionalitet och användarvänlighet. Våra användargränssnitt utvecklas tillsammans med sjukhuspersonal, så att alla våra produkter och system kan användas intuitivt.

Vi kallar detta Fluent usability; personalen i operations-salen kan fokusera på patienten och behöver inte oroa sig över invecklad teknik. Det är något som uppskattas av de främsta kirurgerna i hela världen.



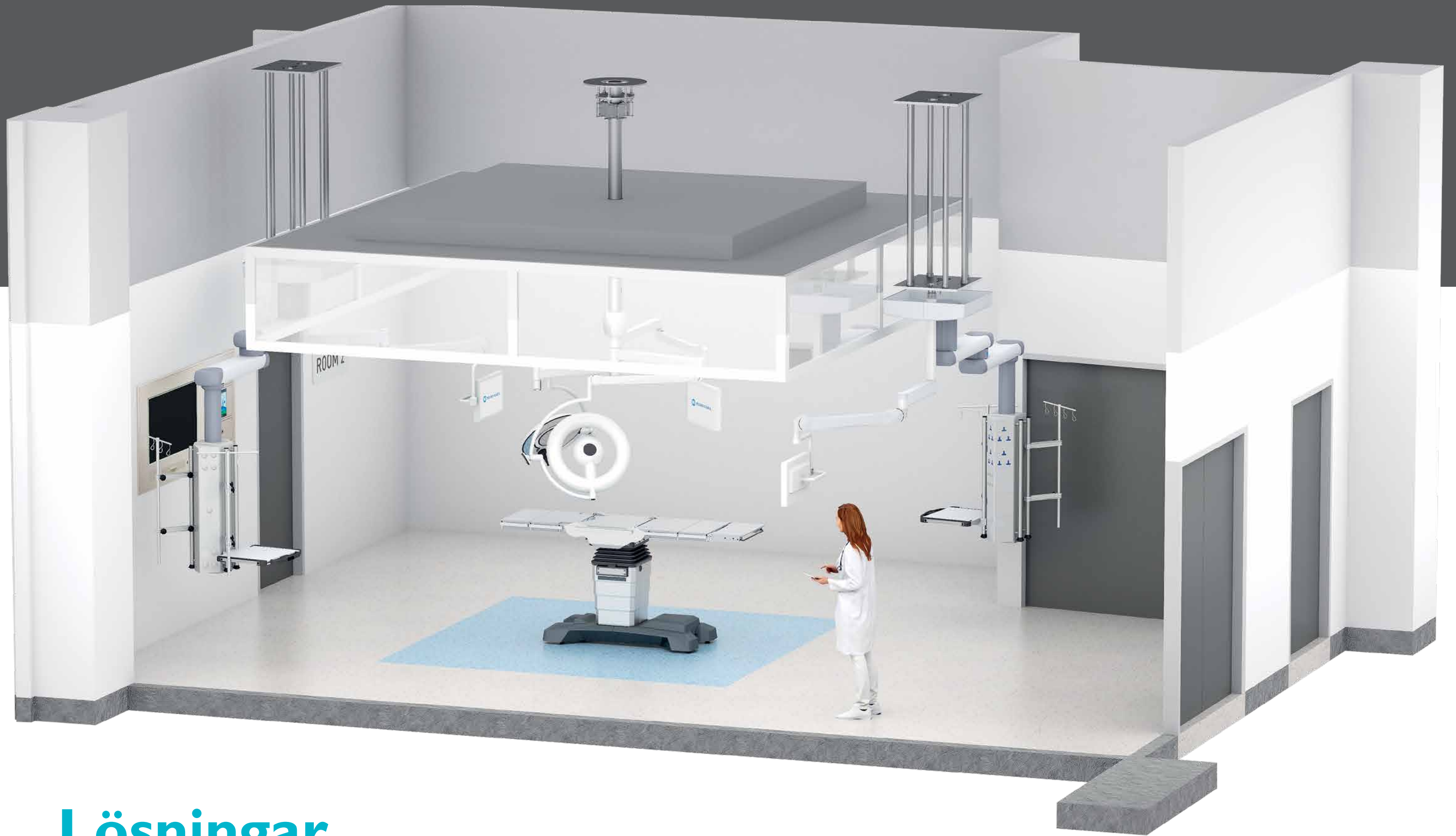

Lösningar

Merivaara erbjuder en rad produkter, system och tjänster av hög kvalitet för operationssalar. Våra lösningar garanterar inte bara patientsäkerheten, de är också mycket prisvärda.

Vi utvecklar produkter och lösningar med hela operationsteamet i åtanke, och det är viktigt för oss att lyssna på kundens behov. På så sätt säkerställer vi att teamet kan genomföra procedurerna på ett säkert, snabbt och effektivt sätt. Det innebär ett förbättrat arbetsflöde och att hela teamet blir mer produktivt.

Merivaara har lång erfarenhet av att leda och genomföra projekt i operationssalar. Det är mycket viktigt för oss att projekten håller tidsramen och att begränsa kostnaderna.

- OPERATIONSGLAMPOR • UNDERSÖKNINGSLAMPOR
- OPERATIONSBORD • TILLBEHÖR TILL BORD
- INTEGRATIONSSYSTEM • MONITORER & MONITORARMAR
- PENDLAR • PROJEKT • MERIVAARA-TJÄNSTER

Rapido

Mångsidig och funktionell



CE MD

Höjdpunkter

Bred brits med 80 mm antistatiskt och hygieniskt viskoelastiskt minnesskum, madrass som anpassar sig till patientens kropp.

Röntgen-kassettskenor, bra bildtagningsåtkomst.

Ger enkel åtkomst till patienten och därmed ergonomiska arbetspositioner för operationspersonalen. Ger tillräckligt benutrymme och ett bra arbetsområde för operationspersonalen.

Smidig rörelse tack vare större antistatiska tvillinghjul som glider mjukt på många olika golvytor, centrallås.

Smidig och tyst höjdställning för optimal positionering som hjälper patienter med begränsad rörlighet att enkelt komma på och av bordet.

Hydraulisk höjdställning och gasfjäder-assisterade justeringar.

Trendelenburg- och anti-Trendelenburg-justeringshandtag.

Lättåtkomliga höjdställningspedaler.

Den lägre underdelen sitter inuti med ett hygieniskt, lättrengjort hölje.



Fördelar med Rapido

1. SMIDIG ÅTKOMST

- Den unika bordskonstruktionen möjliggör närmare åtkomst till operationsområdet.

2. PATIENTENS SÄKERHET

- Patientsäkerhetsräcken under transport

3. ENKELT ATT ANVÄNDA

- Smidig manövrering
- Enkel konfiguration
- Lättviktssektioner
- Liten underdel sparar utrymme

4. EKONOMISK EFFEKTIVITET

- Bra för budgeten
- Sänker inköpskostnaderna



Brits- och underdelskontroller

RAPIDO STANDARD

Rapido är det idealiska operationsbordet/vagnen för operationsenheter som har mycket att göra. Rapido är lätt och enkelt att använda och rengöra, och det minskar den manuella hanteringen och förbättrar effektiviteten i operationssalen och -avdelningen. Den öppna konstruktionen garanterar optimal kirurgisk åtkomst och enkel användning av röntgen- och annan bildtagningsutrustning.

Det finns ett heltäckande utbud av tillbehör så att du kan genomföra många typer av dagkirurgi och mindre kirurgiska ingrepp. Rapido ger snabb och enkel C-arm-åtkomst och är därmed idealiskt för användning på endoskopi-avdelningen.



RAPIDO FÖR INGREPP I ÖVERKROPPEN

Operationsbordet/vagnen Rapido Upper Body är konstruerat för olika ingrepp i överkroppen. Denna modell har förbättrad åtkomst till patientens överkropp och optimerar utrymmet för kirurgens ben och fötter.

Rapido Upper Body är särskilt utformat för olika typer av kirurgi, t.ex. torax, ÖNH, gynekologi, urologi och ingrepp i hand och arm. De justeringar av bordet som kirurgen behöver kunna göra under operationerna i överkroppen styrs bekvämt från bordets huvudände.




Dagkirurgi med Rapido

Många typer av kirurgiska ingrepp görs nu inom dagkirurgin. Med den snabba och effektiva dagkirurgin behöver patienterna inte stanna kvar på sjukhuset över natten, vilket minskar driftskostnaderna avsevärt. Rapido är en patientvagn, ett operationsbord och en återhämtningssäng, allt i en enda enhet. Den minskar kapitalutrustnings- och underhållskostnaderna eller behovet för avdelningssängar, och sparar på så sätt värdefullt utrymme på föroperations- och återhämtningsavdelningarna.

BEHANDLING INFÖR OPERATIONEN

- Möjliggör ett mer avslappnat möte mellan patient och kirurg inför operationen
- Patienten förbereds för operationen utan att behöva överföras till ett operationsbord

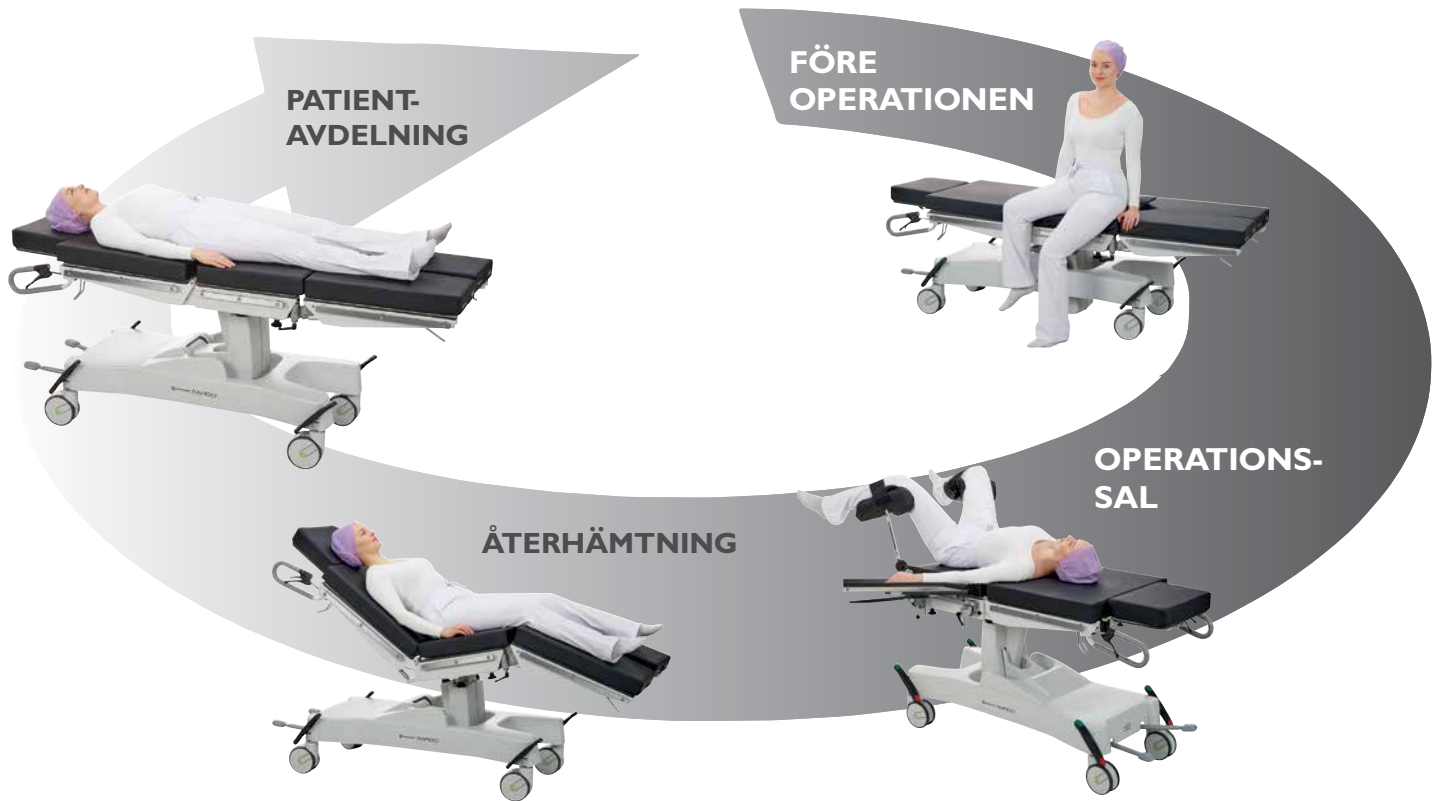

KIRURGISKA INGREPP

- Det mobila Rapido-bordet är enkelt att placera i operationssalen.
- Smidig manövrering
- Rapido är kompatibelt med de flesta tillbehör som monteras på sidoskenor.
- Det modulära huvudstödet kan enkelt avlägsnas för anestesiatkomst till patientens huvud under gynekologiska och urologiska ingrepp

BEHANDLING EFTER OPERATIONEN

- Patient kan transporteras direkt till efteroperationsavdelningen utan att behöva överföras till en säng
- Rapido är kompakt i storleken – i återhämtningsrummet får det plats fler vagnar än sängar
- Gör att patienten kan återhämta sig på Rapido innan transporten till sjukhusavdelningen


Specialtillbehör



Delad bensektion 1000 18261



Gynekologisk/urologisk förlängning 1000 18153

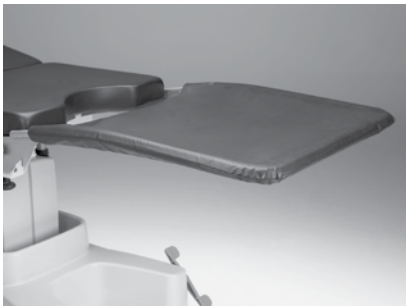

Lätt fotstöd 1000 18001




Röntgen-kassettbricka 1000 18126



Skål (6 liter) med dränering 100 201572 utan dränering 100 201571



Trådback för hjälpmedel 1000 18183

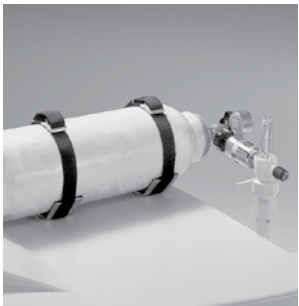

Hållare för syrgasflaska 5 liter 1000 18189



Skjuthandtag för fotände 18168





Pappersrullehållare till Rapido 18572



Infusionsstav 749, ordernummer 1000 00749 Förvaringshållare för infusionsstav, ordernummer 1000 18578




Ett brett sortiment av tillbehör finns i Merivaaras tillbehörskatalog.

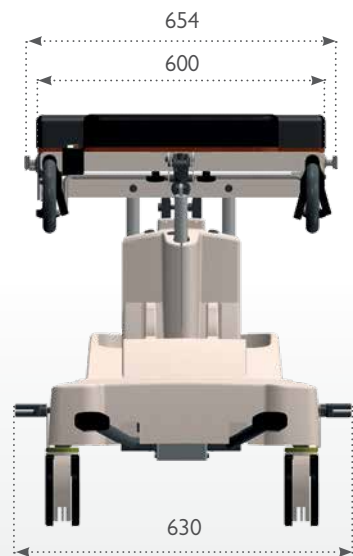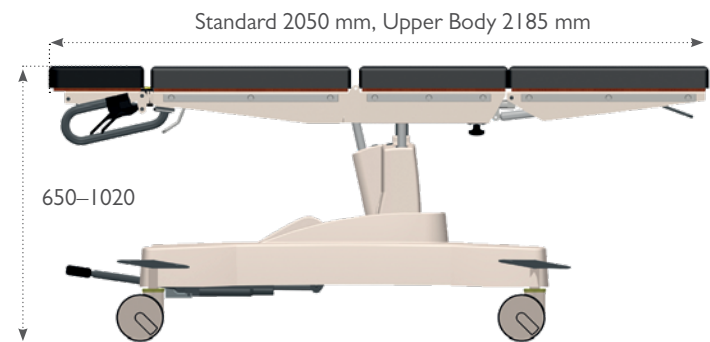


TRENDELENBURG/ ANTI-TRENDELENBURG



JUSTERINGAR AV BENSEKTIONEN

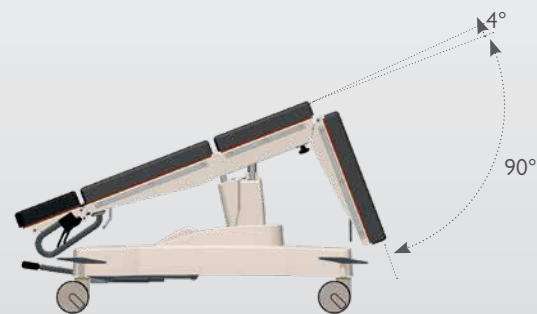

GASFJÄDER-ASSISTERAD JUSTERING AV RYGGSEKTIONEN

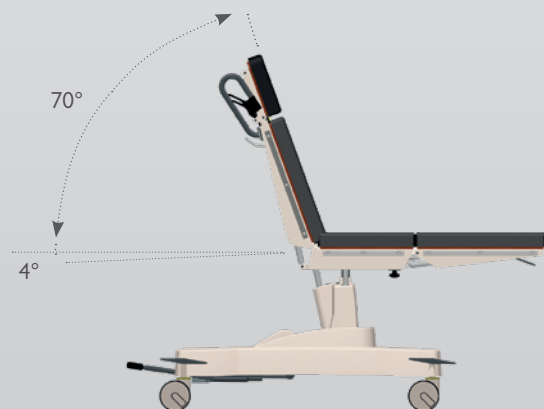

Tekniska specifikationer

	Standard	Upper Body
Längd	2050 mm	2185 mm
Madrassens bredd	600 mm	600 mm
Total bredd	654 mm	654 mm
Vikt	125 kg	125 kg
Säker arbetslast	160 kg	160 kg
Höjd, hydraulisk med fotpedaler	650–1020 mm	650–1020 mm
Trendelenburg, gasfjäder-assisterad	-25°	-25°
Anti-Trendelenburg, gasfjäder-assisterad	+18°	+18°
Sidolutning, gasfjäder-assisterad	± 15°	–
Justering av ryggsektionen, gasfjäder-assisterad	- 4°...+70°	- 4°...+70°
Justering av bensektionen, gasfjäder-assisterad	- 90°...+4°	- 50°...+4°
Huvudstöd	- 40°...+25°	- 40°...+25°
Hjulstorlek	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Antistatiska hjul: tvättbara, svängbara tvillinghjul, enhetspedal för centrallås	✓	✓
Antal britssektioner	4 sektioner/5 sektioner (delad fotsektion)	4 sektioner (bensektion i en del)
Fasta rygg- och sätsektioner	✓	✓
Ben- och huvudsektionerna kan tas av	✓	✓
Britsplatta av röntgenomskinligt högtryckslaminat	✓	✓
Röntgen-kassettskenor längs hela operationsytans längd	✓	✓
Tillbehörsskenor av rostfritt stål	✓	✓
Höljen av stöttålig ABS-plast	✓	✓
Madrasstyp	Antistatiskt och hygieniskt viskoelastiskt minnesskum 80 mm	Antistatiskt och hygieniskt viskoelastiskt minnesskum 80 mm
Garanti	2 år	2 år
Officiellt produktnamn:	Rapido	Rapido Upper Body

Tillverkare: Merivaara Corp.



Health Technology with a Human Touch

Tillverkad i Finland med respekt för vår unika natur.



MERIVAARA CORP.

Lahti, Finland, Tel. +358 3 3394 611,
merivaara@merivaara.com www.merivaara.com

MERIVAARA GLOBALT

Merivaaras huvudkontor, med F&U-, produktions-, sälj- och marknadsföringsavdelning samt efterförsäljningsservice, finns i Lahti, Finland. Merivaara har dotterbolag i Sverige (Merivaara AB), Storbritannien (Merivaara Ltd) samt en säljorganisation i Ryssland. Dessutom säljs Merivaaras produkter i fler än 120 länder via ett nätverk av distributörer.

Status för information, specifikationer och illustrationer i denna publikation indikeras av publikationsdatumet. Även om största omsorg har ägnats åt dess sammanställning, ansvarar Merivaara Corp. inte för eventuella fel eller utelämnanden. Merivaara Corp. förbehåller sig rätten att göra ändringar i teknik, funktioner, specifikationer och utformning av utrustning och modeller utan föregående meddelande. Se Merivaaras webbplats för de senaste uppdaterade specifikationerna och annan information.

Alla varumärken tillhör Merivaara om inget annat anges. Patent godkända eller väntar på godkännande.

©Merivaara Corp. DOK.ID: 6172SV-1, Datum: 11/2023